




KN-298-D 小動物用入墨器 アラミス (Aramis)

アラミスは、実験動物用マイクロ入墨器で、効率良く入墨が出来る実験動物永久識別法です。特にマウスにおいて生後5日頃から使用が可能です。ステンレス製ピンセットの両端に小さい金属カップがついており、一方に皮下注射針を装着し、もう一方にはグリーン入墨ペーストを注入して使用します。ピンセットを強く握ると針が動物の手掌・足跡または耳介を貫通し、色素が注入されます。部位を変えることにより、数多くの番号付けが出来ます。



《セット内容》

ルーペ付本体 (全長135mm)	: 1個 (ルーペφ25mm)
グリーンペースト	: 1本
皮下注射針	: 2個 26G1/2
ペースト受皿	: 1個 φ30×D3mm
ポーチ (黒)	: 1個

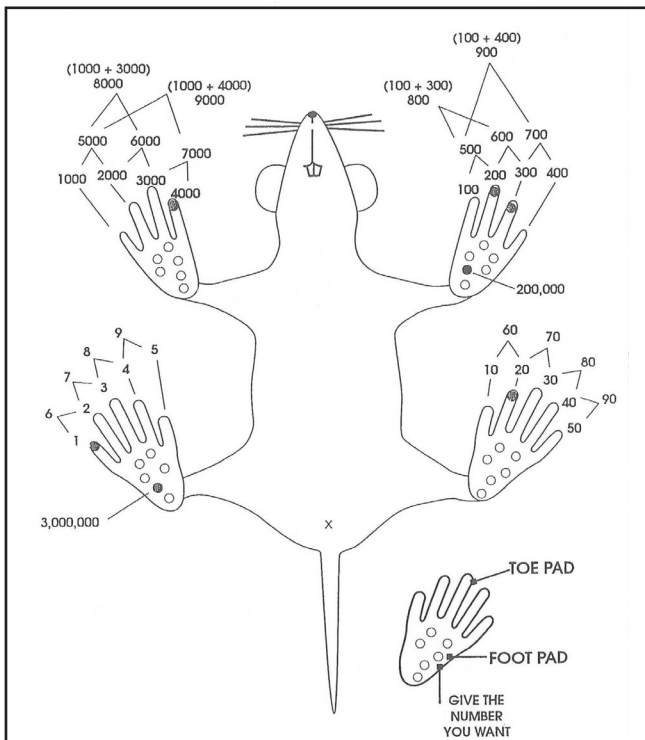

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V5-2208