

大好評



麻醉マスク等から排出される余剰麻醉ガスを吸引し、室外への排気もしくは吸着することで作業者への麻醉ガス曝露を低減します。

【仕様】

本体外寸 : W120×L220×H140mm (突起部含まず)

重量 : 2.0Kg (吸引ノズルを除く)

流量 : 約10L/min

* 吸引ノズル、排気チューブの長さ、除塵フィルターのつまり具合で変動します。

* 流量調整が必要な場合は、KN-1053-FLMをご使用ください。

電源 : AC100V

除塵フィルター：精度10 μ m (KN-1053-VFU3)

吸引ノズル : ご使用方法に応じて、KN-1053-SN 吸引ノズル各種からお選びください。

* ご使用状況に応じて吸引ノズルを特注製作致します。

排気方式 : 室内排気口等へ排気チューブ末端開放 (配管設置が必要) or 吸着方式

【吸引ノズル各種】




KN-1053 余剰麻醉ガス排気装置 (卓上型) 関連製品

KN-1053-SN 吸引ノズル各種




KN-1053-SN1
シングル吸引ノズル

スタンダードなシングル吸引ノズルです。
フレキシブルに吸引したい場所にノズルを保持することが可能です。

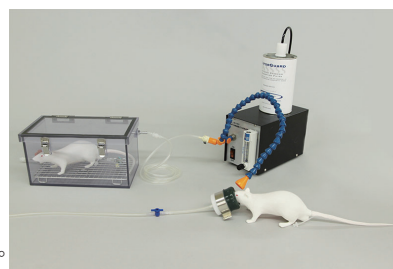


KN-1053-SN1B
シングル吸引ノズル
(導入麻醉ボックス接続口付)

スタンダードタイプに、導入麻醉ボックスからの排気接続口が追加されました。導入麻醉ボックスをご使用される場合にお勧め致します。

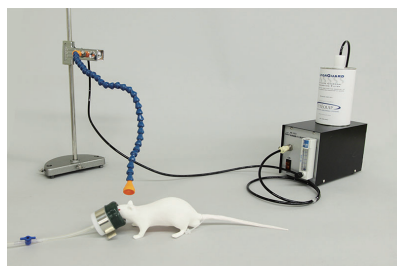

KN-1053-SN1C
シングル吸引ノズル
(固定クリップ付)

装置本体を卓上に置けない場合に、クリップ付きの吸引ノズルと装置本体を離してご使用頂けるように致しました。

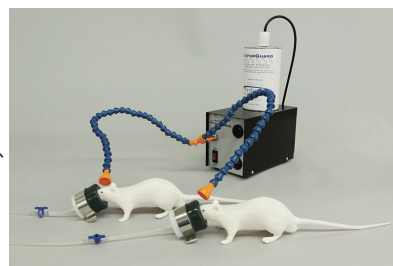

KN-1053-SN2
ダブル吸引ノズル

2本タイプの吸引ノズルです。
2匹同時に使用する場合などにご使用ください。

オプション



KN-1050
麻醉ガス処理装置 A 型

排気される余剰麻醉ガスを吸着させて室内に排気する場合に使用します。
(8 本 / 1 箱)




KN-1053-FLM10
流量調整用セット (~ 10L / min)

排気流量を調整が必要な場合にご使用ください。
~ 10L / min で調整可能です。

使用例



マウス・ラット・マーモセット等、開放型の麻醉マスクをご使用時の余剰麻醉ガスを吸引致します。

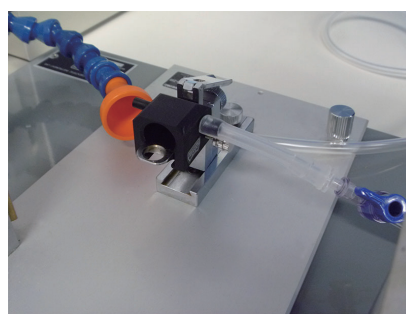

脳定位固定装置や各種イメージング装置、実体顕微鏡等のご使用時に最適です。

* 外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



株式会社 夏目製作所

理化学器械 / 基礎医学器械 / 薬学研究器械
実験動物飼育管理機器 / 医科器械一般

本 社 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002
HP: <http://www.nazme.co.jp>

大阪支社 〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL: 06-6398-7177 FAX: 06-6398-7178

V5-2107