

NARCOBIT-E (Ⅱ型)



KN-1071-I
イソフルラン用



KN-1071-S
セボフルラン用

- **対象動物**
マウス・ラット・マーモセットなど、実験用小動物が主な対象です。
- **使用麻酔薬**
イソフルラン及びセボフルランからお選びいただけます。 *いずれかの麻酔薬専用の麻酔装置です。
- **使用ガス**
空気(エアーポンプ内蔵)を使用しますので、電源があればどこでもお使いいただけます。
また、酸素濃度を上げたい場合はKN-1061「酸素添加ユニット」で調整が可能です。 *個別カタログがございます。
- **複数匹の同時維持**
周辺機器を組み合わせることで、マウスで1～10匹、ラットで1～8匹程度まで対応可能です。
- **必要な機能を、必要なだけ**
各部の見直しにより、従来製品より、さらなるコストダウンを実現しました。
周辺機器を豊富に準備しておりますので、様々なご要望に対応いたします。


仕 様

本体サイズ	W175×D145×H360 mm
本体重量	約 7.7kg (カラフロメーターは除く)
気化器	イソフルラン用またはセボフルラン用 (いずれかの麻酔薬専用)
流 量	導入麻酔ボックス側： 約 5 L / min ※1 維持麻酔マスク側 ： ～ 1.0 L / min ※2
電 源	AC 100V / 8.5W


付属品 ※3 KN-1013-1 カラフロメーター 1L 型 ×1 個
(維持麻酔マスクの流量コントロール用 ※2)



※1：導入麻酔ボックス側の流量調整をご希望の場合は、KN-1013-5 カラフロメーター（5L 型）が別途必要です。
 ※2：維持麻酔を複数匹に対して行う場合には、匹数分のカラフロメーターおよび KN-1013-B5 分流ボックスが別途必要です。
 ※3：その他に、導入麻酔ボックス等が別途必要です。詳細は「吸入麻酔装置関連製品」カタログをご参照ください。

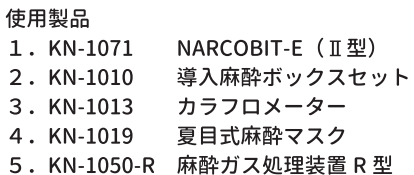

※詳細につきましては、「吸入麻酔装置関連製品」カタログ
および各製品の個別カタログをご参照ください。

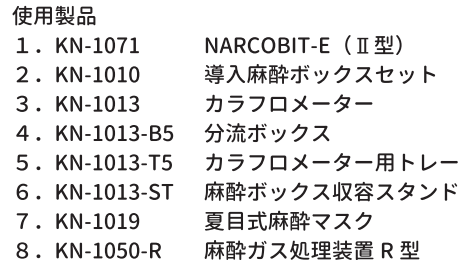

使用製品

1. KN-1071	NARCOBIT-E (Ⅱ型)
2. KN-1010	導入麻酔ボックスセット
3. KN-1013	カラフロメーター
4. KN-1013-B5	分流ボックス
5. KN-1013-T5	カラフロメーター用トレー
6. KN-1013-ST	麻酔ボックス収容スタンド
7. KN-1019	夏目式麻酔マスク
8. KN-1050-R	麻酔ガス処理装置 R 型

「対象動物（マウス？ラット？）」「同時に麻酔をする匹数」「導入麻酔と維持麻酔の同時使用の有無」などをお知らせください。関連製品を含めた「麻酔システム一式」のご提案をさせていただきます。

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。