




KN-754 ロータリーケージワッシャー

- 強力なポンプスプレー、スチームスプレーにより清浄な仕上がりです。
- ターンテーブル方式により重複洗浄ができます。
- 作業員一人の操作で洗浄作業が行えます。
- ターンテーブルの速度は任意に調整できます。
- 広い挿入口で最大W400×H400×L500mm迄のケージ洗浄ができます。

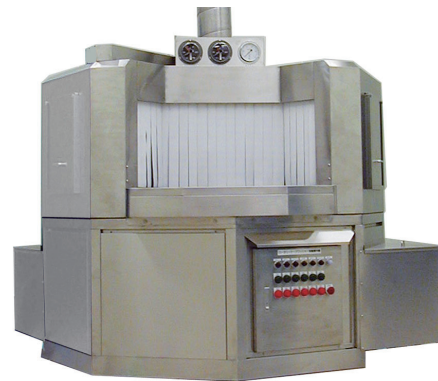

外 寸	W1800×L1800×H1700 mm	給 蒸 源	20～25A 3kg/cm ² MAX70kg/h
材 質	内外装、架台SUS430・304	給 水 源	20～25A 1kg/cm ² MAX400ℓ/h
洗浄方式	ポンプ洗(予洗)～ポンプ洗(本洗) ～スチームスプレー3段式	排 水	65A SGP白管 床上50mm ソケットまたは150×150×D150 以上排水溝
ターンテーブル	回転数2～6rpm、無段変則式		
電 源	AC200V 3P 3.4KW	排 気 量	20m ³ /min (排気ダクト別途)

※ プラスチックケージ専用の小型(W1620×L1620×H1650mm)もあります。

※ 排熱回収装置付の省エネタイプもあります。

* 施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

* 外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V3-2404

