



KN-715 ゼット式水洗ケージ架台

KN-715 ゼット式水洗ケージ架台

架台上部のタンクに一定量の水が溜まると、自動的に上段から下段へと順次Z字状に水洗が行われます。平型サイフォンを採用し、タンクの全幅にわたるスリットから放水することにより、水勢が弱まることなく洗浄でき、更に、水跳ねを防ぎます。タンクを薄くすることにより、装置全体の高さを低くしました。

【仕様】

架台 : SUS304 (ステンレス) 製
サイフォン : 塩ビ製、平型サイフォン・簡易タイマー付
自動給水装置 : SUS304 (ステンレス) 製、ノズル付

型式	収容数	架台寸法 W×L×H (mm)	ケージ寸法 W×L×H (mm)
ウサギ	ZR-12U	4列×3段12ケージ	1,820×635×1,700
	ZR-15U	5列×3段15ケージ	2,200×635×1,700
	ZR-9NU	3列×3段 9ケージ	2,250×740×1,895
	ZR-12NU	4列×3段12ケージ	2,850×740×1,895
ラット	ZR-24R	6列×4段24ケージ	1,935×545×1,610
	ZR-28R	7列×4段28ケージ	2,210×545×1,610
	ZR-32R	8列×4段32ケージ	2,485×545×1,610
モルモット	ZR-20G	5列×4段20ケージ	2,200×560×1,730
	ZR-24G	6列×4段24ケージ	2,580×560×1,730
ネコ	ZR-12C	4列×3段12ケージ	2,030×650×1,800
	ZR-15C	5列×3段15ケージ	2,460×650×1,800
イヌ	ZR-4D	2列×2段 4ケージ	1,900×900×2,060
	ZR-6D	3列×3段 6ケージ	2,650×900×2,060

※特注品の製作も承ります。

※架台の寸法には、タンクの高さ (350mm) は含まれておりません。



ウサギ用



サル用

※ケージサイズの詳細に関しましては、当社までお問い合わせください。

ILARの基準に合ったサイズもございます。


※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

【自動飼育装置専用ケージ各種】

● KN-775 ラットケージ

【仕様】

本体：ステンレスワイヤー製
給餌器：KN-675-2
寸法：W240×L380×H200mm

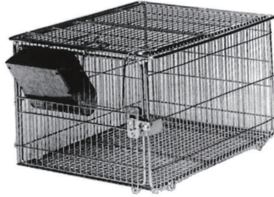

● KN-776 ラットケージ

【仕様】


本体：アルミニウム製
または、ステンレス製
給餌器：KN-675-2
寸法：W240×L380×H200mm



● KN-777 ラットケージ

【仕様】


本体：アルミニウム製
または、ステンレス製
積重型
給餌器：KN-675-2
寸法：W240×L380×H200mm

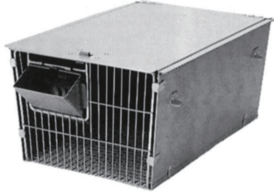

● KN-779 ラットケージ

【仕様】


本体：ステンレスワイヤー製
給餌器：KN-675-1A
寸法：W240×L200×H200mm

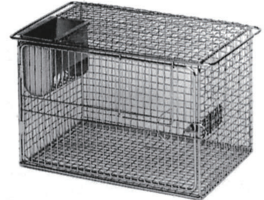

● KN-785 モルモットケージ

【仕様】

本体：アルミニウム製
または、ステンレス製
給餌器：KN-675-6B
寸法：W350×L400×H210mm

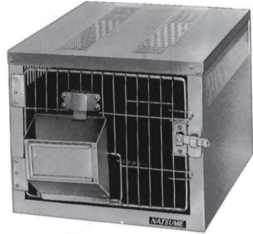


● KN-785-B モルモットケージ積重式

● KN-790 ウサギ二連ケージ

【仕様】

本体：アルミニウム製
巣箱付
給餌器：KN-675-6A
寸法：W730×L480×H350mm

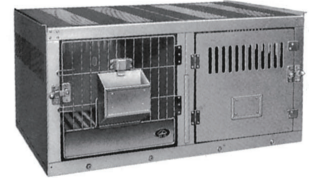

● KN-791 ウサギケージ

【仕様】


本体：アルミニウム製
または、ステンレス製
給餌器：KN-675-6A
F.T.Pスノコ付
寸法：W600×L550×H370mm



● KN-793 ネコケージ

【仕様】

本体：アルミニウム製
給餌器：ステンレス製
寸法：W400×L480×H400mm
狭体装置付

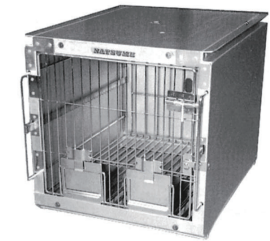

● KN-795 イヌケージ

【仕様】


本体：アルミニウム製
給餌器：ステンレス製
寸法：W800×L700×H700mm



● KN-797 サルケージ

【仕様】

本体：ステンレス製
給餌器：ステンレス製
寸法：W600×L600×H650mm
狭体装置付

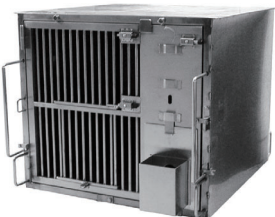

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般 V3-2404

