

New Product

80th Anniversary



つながりを力に、未来へ

周年内発売を目指し

開発中

Currently under development

開発中のため
仕様が変更となることが
ございます。



情報もりたくさん!
こちらのQRも
チェック!



NEW 80周年記念製品 KN-476

ヒーターマット

使い慣れた安心に、しっかり進化を!

Purpose
用途

- ・マウス・ラットなど小動物の体温管理に。
- ・麻酔下、術前・術後の周術期保温に。
- ・ケージごとの保温から、動物を載せて処置中の保温も。
- ・採血前の血管拡張や、新生仔の保温にも。

 <https://www.nazme.co.jp>



80th Anniversary

ヒーターマット KN-476

Heater Mat 開発中のため仕様が変更となることがございます。

つながりを力に、未来へ

「なくなったら困る！」のお声に背中を押され、鋭意開発中です！



マウスケージ(KN-601U)をそのまま置いて保温できる20×30cm。卓上でも場所を取らず、使いやすいサイズです。



表面シートは汚れが付きにくく、水洗いにも対応。シンクですっと洗えるため、日常のお手入れがしやすく、清潔な状態でご使用いただけます。

進化
ポイント！

温度コントローラありのラインナップを追加し、環境温度や用途により、マット面の温度調整可。

ゴム足と重量感のある仕様で滑りづらい。

変わらぬ
使いやすさ！

マットは水洗・アルコール清拭可。汚れにくく、洗しやすい。

使いやすいサイズで解剖台使いも、ケージ保温も。



SCAN HERE



発売をいち早く知りたい方へ！
ご案内メールに登録いただけます。



株式会社 夏目製作所
<https://www.nazme.co.jp>

◎本社
113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251 FAX : 03-3815-2002

◎大阪SSC
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177 FAX : 06-6398-7178



V1-2604J



KN-475 ヒーターマット

パネル全面をむらなく暖める面発熱方式の採用により、高い安全性を実現しました。
水にも強い驚異の耐久性を持つ保温用マットです。
新生仔の保温、手術時及び術後の保温に適しております。

後継リニューアル品
開発中



(画像: Ⅲ型 W200×L300×T10mm)

※現行品は在庫限りの販売となります。

- 高い安全性
特殊な発熱体(金属発熱線をテフロンで被覆)とサーモスタット・ヒューズを用いた安全構造です。
- 均一発熱
表面温度が均一であり、遠赤外線効果により保温します。
- 水に強い驚異の耐久性
ガラス繊維入り強化プラスチック(FRP)により一体成形をしています。
洗浄水・汚水等がかかっても漏電の心配がありません。

【仕様】


型番・品名	寸法(mm)	固定用穴	コードスプリング	温度℃	電源AC
KN-475-1 I型	W600×L900	○	○	35~40	100V×180W
KN-475-2-35 II型35℃	W450×L600	○	○	35	100V×90W
KN-475-2-40 II型40℃		○	○	40	
KN-475-3-35 III型35℃	W200×L300	×	×	35	100V×30W
KN-475-3-40 III型40℃		×	×	40	

I型・II型：販売終了

III型：在庫限り(後継リニューアル品開発中)

- 固定用穴 : I型・II型 → 有
III型 → 無
- 電源コード保護ステンレススプリング: I型・II型 → 取付け有
III型 → 無

【構造 I型参考】

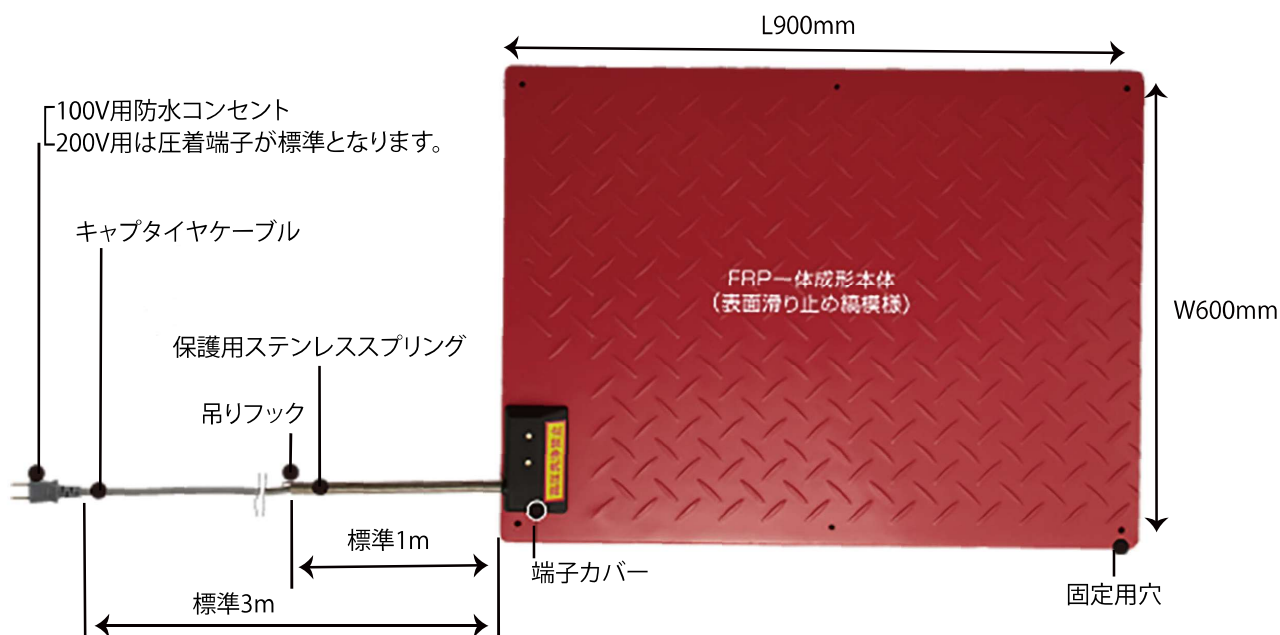

● 動物実験機器

● 実験動物飼育器機 / 管理機器

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

V5-2404J