



## KN-475 ヒーターマット

パネル全面をむらなく暖める面発熱方式の採用により、高い安全性を実現しました。  
水にも強い驚異の耐久性を持つ保温用マットです。  
新生仔の保温、手術時及び術後の保温に適しております。

後継リニューアル品  
開発中



(画像：Ⅲ型 W200×L300×T10mm)

※現行品は在庫限りの販売となります。

- 高い安全性  
特殊な発熱体(金属発熱線をテフロンで被覆)とサーモスタット・ヒューズを用いた安全構造です。
- 均一発熱  
表面温度が均一であり、遠赤外線効果により保温します。
- 水に強い驚異の耐久性  
ガラス繊維入り強化プラスチック(FRP)により一体成形をしています。  
洗浄水・汚水等がかかっても漏電の心配がありません。

## 【仕様】


| 型番・品名               | 寸法(mm)    | 固定用穴 | コードスプリング | 温度℃   | 電源AC      |
|---------------------|-----------|------|----------|-------|-----------|
| KN-475-1 I型         | W600×L900 | ○    | ○        | 35～40 | 100V×180W |
| KN-475-2-35 II型35℃  | W450×L600 | ○    | ○        | 35    | 100V×90W  |
| KN-475-2-40 II型40℃  |           | ○    | ○        | 40    |           |
| KN-475-3-35 III型35℃ | W200×L300 | ×    | ×        | 35    | 100V×30W  |
| KN-475-3-40 III型40℃ |           | ×    | ×        | 40    |           |

I型・II型：販売終了

III型：在庫限り(後継リニューアル品開発中)

- 固定用穴 : I型・II型 → 有  
III型 → 無
- 電源コード保護ステンレススプリング: I型・II型 → 取付け有  
III型 → 無

## 【構造 I型参考】

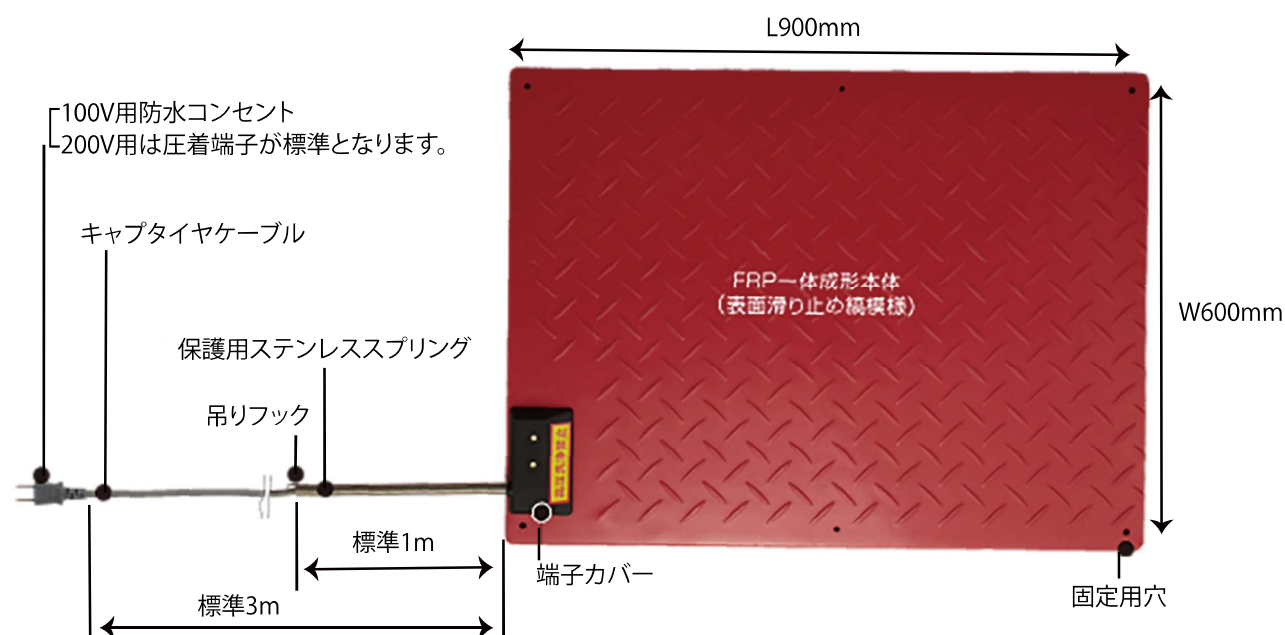

● 動物実験機器

● 実験動物飼育器機 / 管理機器

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

V5-2404J