




J-4-BD090 電動解剖鋸 Mopec5000

- ・ 本体は密閉構造の防水仕様です。全体を水に浸けて洗浄することが可能なので、衛生的に使用できます。さらに、密閉構造により、カッティングで生じた骨粉等の塵芥がモーターと接触して微粒子化しないため、作業中に吸引するリスクが減少します。
- ・ 40Vという低電圧の採用により、誤ってコードが切断された場合でも感電による障害のリスクが減少しました。また、本体の加熱やモーターの消耗が抑えられます。
- ・ 頑丈な筐体と静粛なモーターの組み合わせにより、操作時の低騒音、低振動を実現しました。
- ・ 本体の前後の重量バランスをほぼ5対5にしたことで、使用時の手と手首への負担が最小限に抑えられます。
- ・ ブレード(刃)の本体先端への着脱が容易になり、ブレード(刃)交換時の安全性が高まりました。

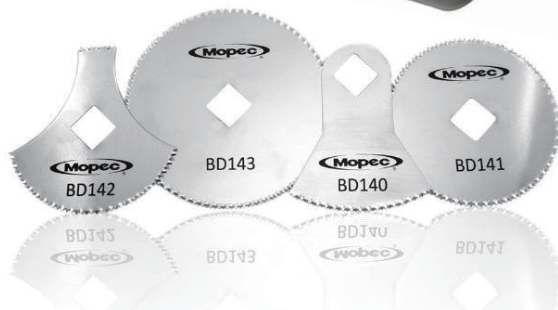

【仕 様】

ブレード振動数: 13,200回/分 (CPM)

最細部直径 : ϕ 約50mm(持ち手)

全 長 : 250mm (刃を除く)

重 量 : 約1.3kg (電源コードを除く)

ハンドピースホルダー付(アルミ製)

過負荷防止用自動減流機構付

密閉型筐体

15分間までの浸漬洗浄が可能

(15分間を超えると浸水による故障の可能性があります。)

【替 刃】

付属替刃: クロームメッキブレード×4枚セット


BD140 51mmイチョウ葉型

BD141 64mm円形


BD142 64mmイチョウ葉型

BD143 76mm円形

その他付属品: ブレード交換工具

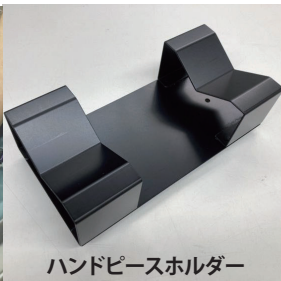

ハンドピースホルダー

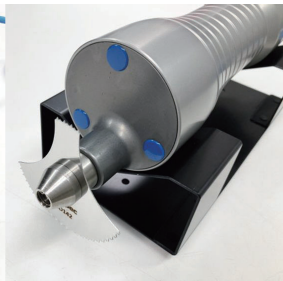

本機は、標本・試料用の骨の切除・切断(カッティング)を目的として設計された病理学、解剖学、法医学などの専門家用ツールです。一般消費者向け製品ではありません。

*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

J-4-BD093 ボーン・ダスト・コレクター

(J-4-BD090 電動解剖鋸 Mopec5000専用)

- ・電動解剖鋸のスイッチに連動して作動します。
- ・防水規格IP44です。
- ・ペーパーフィルターバッグ、布フィルターバッグ、HEPAフィルターと3段階で排気のろ過をします。
- ・有害となるおそれのある骨粉塵をパワフルなモーター(風量90リットル/秒)と3段階のフィルターでしっかりと捉えます。
- ・コンパクトで安全性に優れており、キャスター付台座(ストッパー付)で移動が容易です。



【仕様】

ホース:φ26×H4,110 mm

重量:15kg (キャスター部含む)

キャスター部1.9Kg

電源: AC115V、60Hz、1.5 Amp、40V

(AC100V、50/60Hzで使用できます)

交換品として下記5アイテム/箱で販売しています。

交換用品: シリコンカバー(ヘッド部)	:10個
バキュームホース	:1本
ペーパーフィルターバッグ (容量約7リットル)	:50枚
布フィルターバッグ	:1枚
HEPAフィルター	:1枚

【交換品 1セット/箱】



*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V4-2205