



J-4-BD090 電動解剖鋸 Mopec5000


- ・ 本体は密閉構造の防水仕様です。全体を水に浸けて洗浄することが可能なので、衛生的に使用できます。さらに、密閉構造により、カッティングで生じた骨粉等の塵芥がモーターと接触して微粒子化しないため、作業中に吸引するリスクが減少します。
- ・ 40Vという低電圧の採用により、誤ってコードが切断された場合でも感電による障害のリスクが減少しました。また、本体の加熱やモーターの消耗が抑えられます。
- ・ 頑丈な筐体と静粛なモーターの組み合わせにより、操作時の低騒音、低振動を実現しました。
- ・ 本体の前後の重量バランスをほぼ5対5にしたことで、使用時の手と手首への負担が最小限に抑えられます。
- ・ ブレード(刃)の本体先端への着脱が容易になり、ブレード(刃)交換時の安全性が高まりました。



【仕様】
ブレード振動数:13,200回/分 (CPM)
最細部直径 :φ約50mm(持ち手)
全長 :250mm(刃を除く)
重量 :約1.3kg(電源コードを除く)
ハンドピースホルダー付(アルミ製)
過負荷防止用自動減流機構付
密閉型筐体
15分間までの浸漬洗浄が可能
(15分間を超えると浸水による故障の可能性があります。)

【替刃】
付属替刃:クロームメッキブレード×4枚セット
BD140 51mmイチョウ葉型
BD141 64mm円形
BD142 64mmイチョウ葉型
BD143 76mm円形
その他付属品:ブレード交換工具

防水

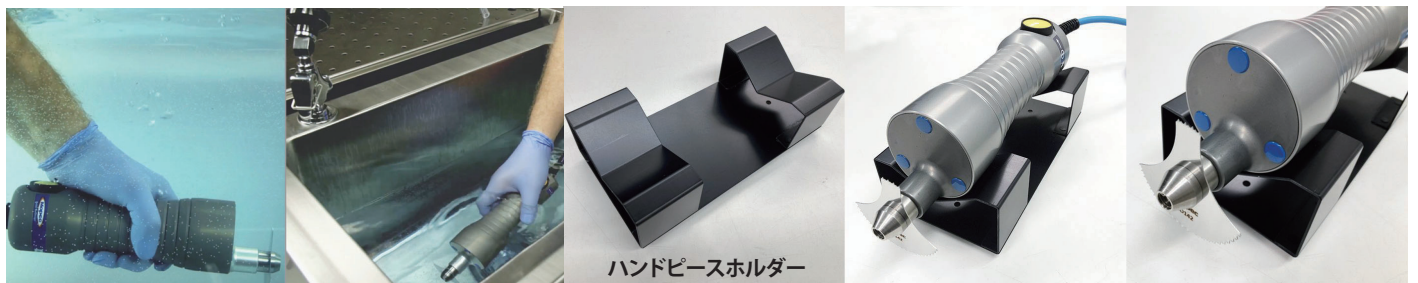


本機は、標本・試料用の骨の切除・切断(カッティング)を目的として設計された病理学、解剖学、法医学などの専門家用ツールです。一般消費者向け製品ではありません。

*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

J-4-BD093 ボーン・ダスト・コレクター

(J-4-BD090 電動解剖鋸 Mopec5000専用)

- ・電動解剖鋸のスイッチに連動して作動します。
- ・防水規格IP44です。
- ・ペーパーフィルターバッグ、布フィルターバッグ、HEPAフィルターと3段階で排気のろ過をします。
- ・有害となるおそれのある骨粉塵をパワフルなモーター（風量90リットル/秒）と3段階のフィルターでしっかりと捉えます。
- ・コンパクトで安全性に優れており、キャスター付台座（ストッパー付）で移動が容易です。

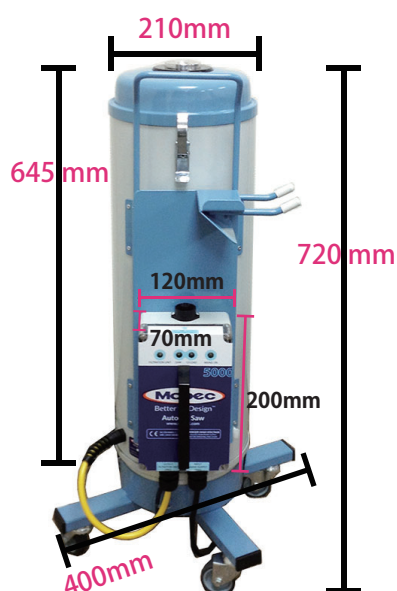

【仕様】

ホース：φ26×H4,110 mm

重量：15kg（キャスター部含む）

キャスター部1.9Kg

電源：AC115V、60Hz、1.5 Amp、40V

（AC100V、50/60Hzで使用できます）

交換品として下記5アイテム/箱で販売しています。

交換用品：シリコンカバー（ヘッド部）	:10個
バキュームホース	:1本
ペーパーフィルターバッグ （容量約7リットル）	:50枚
布フィルターバッグ	:1枚
HEPAフィルター	:1枚

【交換品 1セット/箱】



*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V5-2404

