



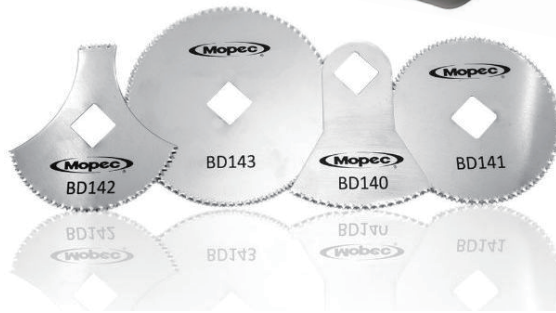

## J-4-BD090 電動解剖鋸 Mopec5000

- ・ 本体は密閉構造の防水仕様です。全体を水に浸けて洗浄することが可能なので、衛生的に使用できます。さらに、密閉構造により、カッティングで生じた骨粉等の塵芥がモーターと接触して微粒子化しないため、作業中に吸引するリスクが減少します。
- ・ 40Vという低電圧の採用により、誤ってコードが切断された場合でも感電による障害のリスクが減少しました。また、本体の加熱やモーターの消耗が抑えられます。
- ・ 頑丈な筐体と静粛なモーターの組み合わせにより、操作時の低騒音、低振動を実現しました。
- ・ 本体の前後の重量バランスをほぼ5対5にしたことで、使用時の手と手首への負担が最小限に抑えられます。
- ・ ブレード(刃)の本体先端への着脱が容易になり、ブレード(刃)交換時の安全性が高まりました。

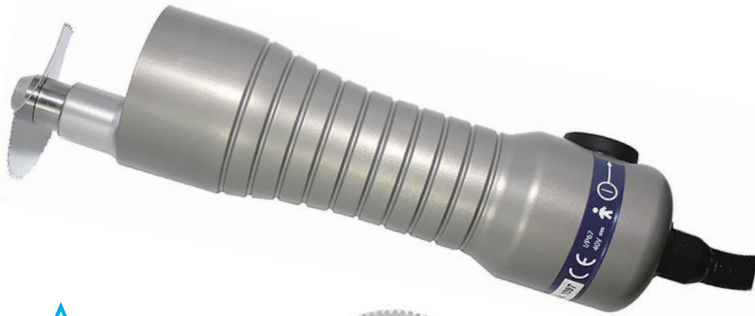

### 【仕様】

ブレード振動数:13,200回/分 (CPM)

最細部直径 :φ約50mm(持ち手)

全長 :250mm(刃を除く)

重量 :約1.3kg(電源コードを除く)

過負荷防止用自動減速機構付

密閉型筐体

15分間までの浸漬洗浄が可能

(15分間を超えると浸水による故障の可能性があります。)

### 【替刃】

付属替刃:クロームメッキブレード×4枚セット

BD140 51mmイチョウ葉型

BD141 64mm円形

BD142 64mmイチョウ葉型

BD143 76mm円形

その他付属品:ブレード交換工具




本機は、標本・試料用の骨の切除・切断(カッティング)を目的として設計された病理学、解剖学、法医学などの専門家用ツールです。一般消費者向け製品ではありません。

\*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## J-4-BD093 ボーン・ダスト・コレクター (J-4-BD090 電動解剖鋸 Mopec5000専用)

- ・電動解剖鋸のスイッチに連動して作動します。
- ・防水規格IP44です。
- ・ペーパーフィルターバッグ、布フィルター、HEPAフィルターと3段階のろ過です。
- ・有害となるおそれのある骨粉塵をパワフルなモーター(風量90リットル/秒)と3段階のフィルターでしっかりと捉えます。
- ・コンパクトで安全性に優れており、キャスター付台座(ストッパー付)で移動が容易です。

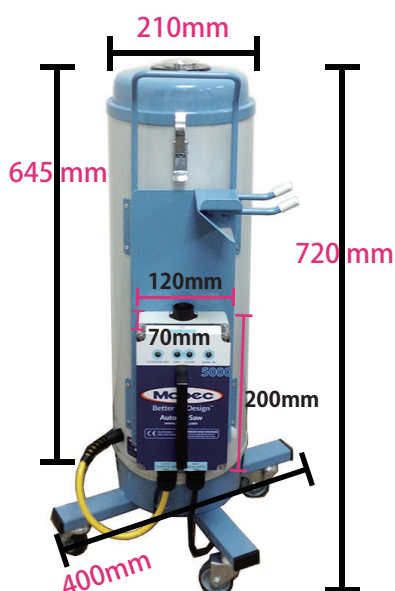

### 【仕様】

ホース:φ26×H4,110 mm

重量:15kg (キャスター部含む)

キャスター部1.9Kg

電源: AC115V、60Hz、1.5 Amp、40V

(日本の商業電源 AC100V、50/60Hzで使用できます)

付属品として下記5アイテムが各1付いてます。

交換用品: シリコンカバー(ヘッド部) :10個  
 バキュームホース :1本  
 ペーパーフィルター :50枚  
 (容量約7リットル)  
 布フィルター :1枚  
 HEPAフィルター :1枚

### 【付属品】



\*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-1907



株式会社 夏目製作所

本社 〒113-8551  
 東京都文京区湯島2-18-6  
 TEL : 03-3813-3251  
 FAX : 03-3815-2002  
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社 〒567-0085  
 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18  
 彩都バイオヒルズセンター3F  
 TEL : 072-646-9311  
 FAX : 072-646-9300