

SLA Ventilator



マウス・ラット・マーモセット等小動物専用開発された人工呼吸器です。
性能の向上、使いやすさ、さまざまな実験ニーズに対応できる拡張性を追求しました。

● 性能

マイクロコンピュータと高性能電磁弁の採用で、制御の安定性と信頼性を高めました。
1分間最大250回の呼吸数まで正確に作動します。

● 使いやすさ


本体はコンパクト設計で、実験台の上においても邪魔になりません。
気道内圧をモニタリングし、設定値以上の圧力になった場合にはアラームで知らせる機能を標準で備えています。

● 拡張性

AIR (室内の空気)・GAS (麻酔ガス等) モードを選択可能で、使用する気体を選びません。
その他、麻酔装置・気管挿管チューブ・挿管台・喉頭鏡等の周辺機器も豊富に用意しています。

仕 様	サイズ/重量	: W140×D280×H176mm/約3.6kg	
	電源(定格伝流)	: AC100V (0.5A)	
	定格流量	: 0.04~0.5L/min	
	呼吸数設定範囲	: 0~250回/min (1回/min単位で設定可能)	
	吸気割合設定	: 0~100% (I:E比を設定可能)	
	気道内圧測定範囲	: 0~6,000 Pa	
	機 能	: 気道内圧異常アラーム機能、設定値メモリー機能、麻酔装置簡単接続機能	
	付 属 品	: 麻酔Y回路 (KN-1015) マウス用・ラット用各1本、麻酔ガス排気回路×2本、 麻酔ガス供給回路×1本、INTERNAL流量計回路×1本	

SLA Ventilator 関連製品

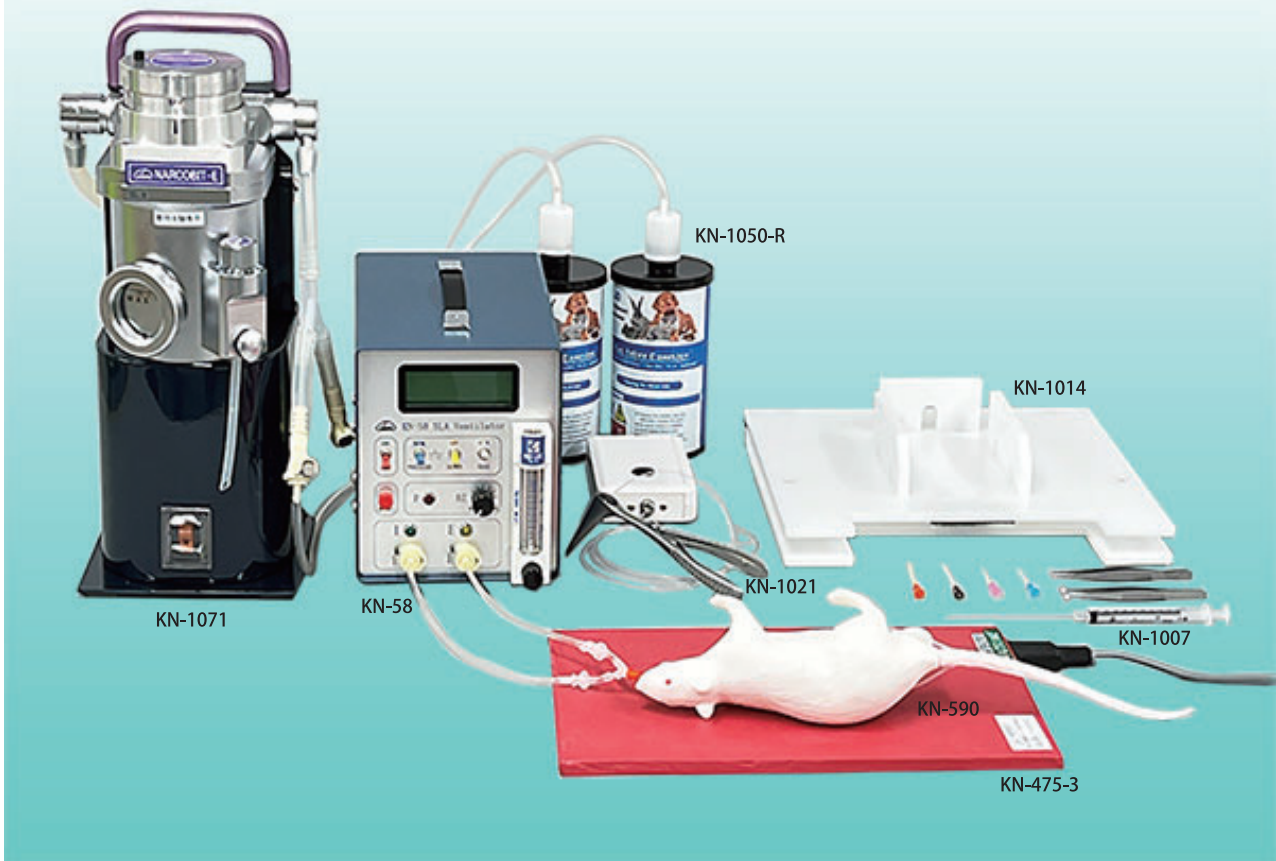

- 組合せ例**
- KN-58 SLA Ventilator
 - KN-1071 NARCOBIT-E (Ⅱ型)
 - KN-1050-R 麻酔ガス処理装置 (R型)
 - KN-1014 挿管台
 - KN-1021 喉頭鏡セット
 - KN-1007 気管内チューブ R (ラット) 用セット
(KN-1008 気管内チューブ M (マウス) 用セットもございます。)
 - KN-475 ヒーターマット (Ⅲ型)
(KN-590 NATSUME RAT (動物実験手技訓練用ラットモデル))

その他



KN-1061
 麻酔酸素添加ユニット
 麻酔キャリアガス中の酸素濃度を上げる
 際に使用 <個別カタログがございます>

お気軽にお問い合わせください

「対象動物 (マウス?ラット?)」「同時に麻酔をする匹数」「導入麻酔と維持麻酔の同時使用の有無」などをお知らせください。関連製品を含めた「麻酔システム一式」のご提案をさせていただきます。

※別途「気管挿管マニュアル」がございます。

※別途「関連製品カタログ」がございます。

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

理化学器械 / 基礎医学器械 / 薬学研究器械 / 実験動物飼育管理機器 / 医科器械一般

V6-2404

