



液体飼料用給餌器

KN-676

小動物用の液体飼料用給餌器です。

目盛付ガラス試験管、先管もガラス加工製、シリコンゴム栓をはめて使います。

容量は100ml用です。


液体の濃度が薄い場合と濃い場合で、使用する先管サイズが異なります。



先管は、低濃度のものは径がφ10、高濃度ものは径がφ20です。

L字型で管の上部に飲み口が開いています。

	仕様	
本体	φ35×L200mm	ガラス製・100ml目盛付
先管	φ10×L60mm	低濃度用
	φ20×L70mm	高濃度用
ゴム栓	シリコンゴム製	

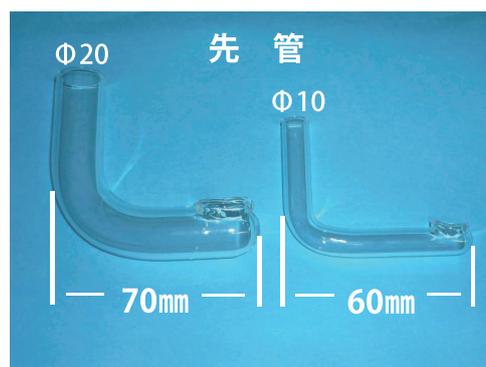

ケージの側面に取付けて垂直にセットして使用するホルダーは、使用ケージに合わせて別途製作となります。また、L字型ホルダーも作成致します。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般



本社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社 〒567-0085
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL : 072-646-9311
FAX : 072-646-9300