




# KN-735-A 陰陽圧飼育ラック



室内エア 排気ダクト接続

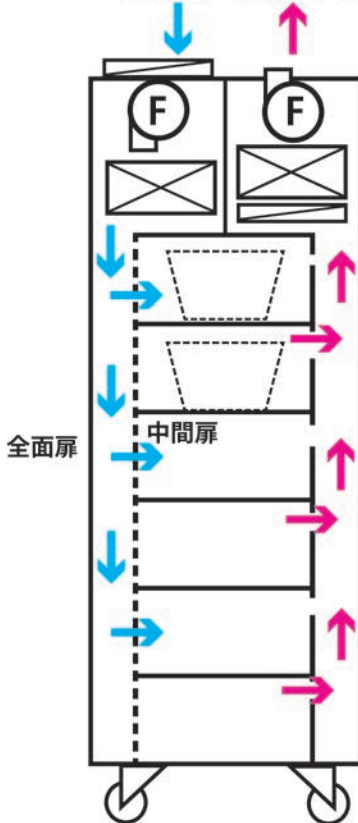

HEPAフィルターを介して取り込まれた室内の空気は、前面扉と中間扉の間に給気され、飼育棚部を経て背面の排気チャンバー部から排気用HEPAフィルターを介して排気されます。

本体内外装はステンレスSUS304製で、給水方法は自動給水ノズル配管方式と給水瓶方式が選択できます。

### 【特徴】

- 前面から背面にクリーンエアが流れる一方向気流方式のため棚間のクロスコンタミが防げ、良好な飼育環境が維持できます。
- 臭気が前面から出ることが無く、動物アレルギー\*1から実験者・作業者を守ります。
- 風量調節が可能な施設側排気接続により、排気ファンを省略し、無振動で静かな飼育環境を得ることも可能です。

\*1:ここでいうアレルギーとは、動物由来のタンパク質に起因するものを指します。

※ ご指定のケージに合わせた列数×段数のラックが製作出来ます。  
施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1402