



# KN-755-DRY 乾燥機能付ケージワッシャー

- ・強力な洗浄力で浸漬洗いが不要です（洗浄工程4段階）。
- ・洗浄温水は前行程で再利用します。水・エネルギーを無駄にしません。
- ・83℃以上の高温熱風乾燥により殺菌・消毒も兼ねます。
- ・完全乾燥ですので、取り出し口にて即、床敷充填が可能です。



## 【仕様】


寸法：W1,050×L8,500×H2,200mm

（被洗浄物により設計変更可能）

能力：KN-600 マウスケージで500ケージ以上/h

必要ユーティリティ

- 蒸気：最大350kg/h
- 水：30 l/min（初期充填量：750 l）
- 電気：AC200V・3φ・18kW
- 排水：100A（熱水）
- 排気：15m<sup>3</sup>/min×2ヶ所

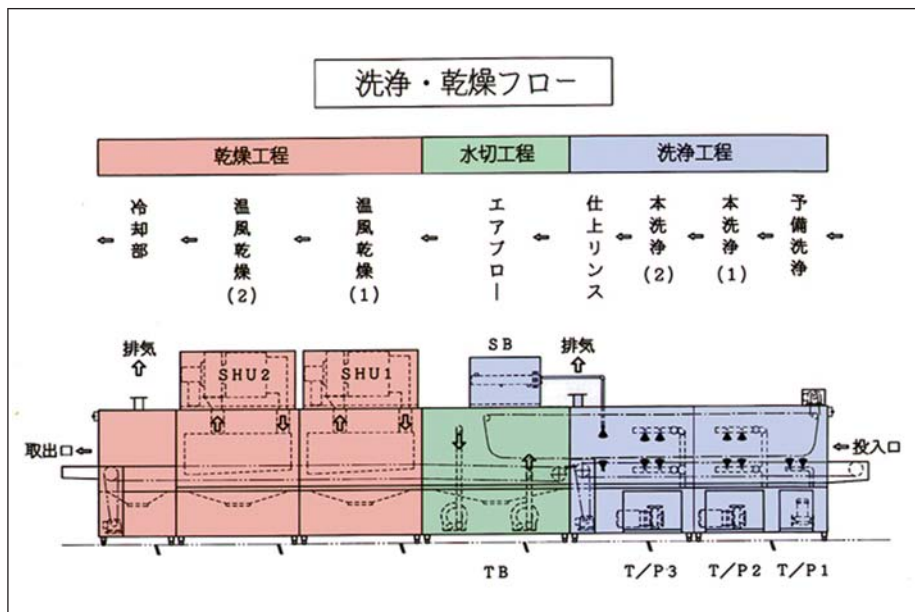

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1607