

# 小動物電気バリカン各種

スライヴ



## E-20-2100 小動物電気バリカン

替刃：専用替刃(0.5mm)のみです。

軽量、細身のコードレスタイプ 60分間連続使用可能  
マウス、ラット等小動物のデリケートな部分の仕上げに最適  
3mmと6mmのアタッチメント付

充電タイプ〈スタンド式〉

**MODEL 2100** **THRIVE**

標準価格 7,900円 (税別) 専用替刃付(0.5mm)

[本体仕様]

水洗いできません

- 寸法 :  $\phi 33 \times L152 \times H33$  mm
- 電源 : AC100V・50/60Hz・10W
- ストローク : 約 5,000 回転 / 分
- 重量 : 約 110g (刃付)
- カラー : ブラック

[充電池]

- 連続使用時間 : 60分 (フル充電時)
- 充電時間 : 約16時間
- 使用電池 : ニッケル水素電池
- アダプター入力 : AC100V・50/60Hz・10W
- アダプター出力 : DC4V・250mA
- 充電器コード : 約1.6m

専用の替刃のみの販売もしております。




付属品・各部名称

- ・ オイル ×1
- ・ ブラシ ×1
- ・ 充電器 (コード約1.6m) ×1
- ・ アタッチメント3mm ×1
- ・ " " 6mm ×1
- ・ 取扱説明書+保証書 ×1

替刃

本体

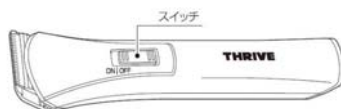

アタッチメント

充電器

アタッチメント入れ

アダプターコード



ブラシ

オイル

# E-20-525 小動物電気バリカン

替刃：ご希望の刃をお選びください。

コンパクトなボディと2段階スピード切替機能で高い操作性  
よく切れ、耐久性に優れた DLC&チタンコーティング刃を採用  
誤作動を防ぎ、緊急停止時にも操作しやすいプッシュ式の ON/OFF スイッチ


交流タイプ

## MODEL 525 THRIVE

本体価格 17,700円（税別）替刃は別売

[本体仕様] **水洗いできません**

- 寸法 :  $\phi 36 \times L200 \times H40$  mm
- コード : 約 2.5m
- 電源 : AC100V・50/60Hz・10W
- ストローク : High 約 1,800 回転/分  
(2速切替) : Low 約 1,500 回転/分
- 重量 : 約 255g
- カラー : シャンパンゴールド (SG)  
: シャンパンピンク (SP)

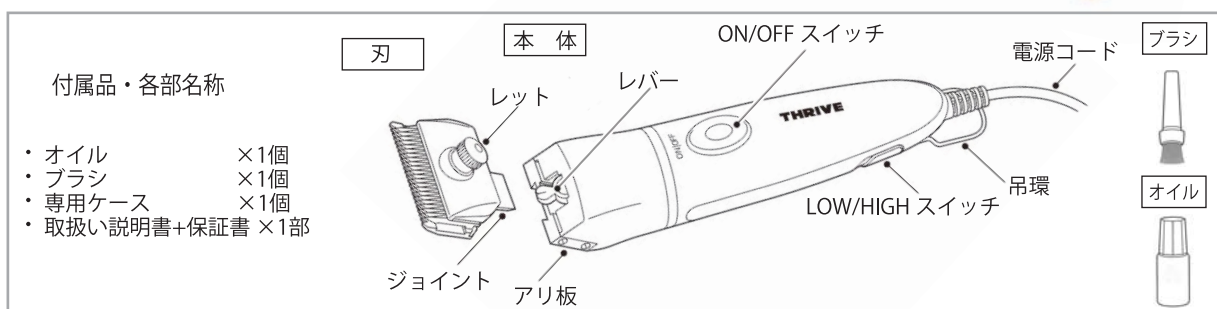

# E-20-515R 小動物電気バリカン

替刃：ご希望の刃をお選びください。

従来モデル (5000AD 系) から 20%スリム化、330g の軽量を実現  
よく切れ、耐久性に優れた DLC&チタンコーティング刃を採用  
コードレスで 60 分間使用可能・急速充電 90 分 (バッテリー 1 本あたり)

充電・カセット電池式タイプ<スタンド式>

## MODEL 515R THRIVE


本体価格 18,000円（税別）替刃は別売

[本体仕様] **水洗いできません**

- 寸法 :  $\phi 40 \times L200$  mm (刃付)
- ストローク : 約 1,900 回/分
- 重量 : 330g (刃付)

[カセット式充電電池]

- 連続使用時間 : 60分 (フル充電時)
- 充電時間 : 90分 (急速充電)
- 使用電池 : ニッケル水素電池 (Ni-MH)
- バッテリー定格電圧 : DC 2.4V
- バッテリー容量 : 2100mAh
- 充電器定格電圧 : 入力 : AC 100V・50/60Hz・0.2A  
: 出力 : DC 2.8V・1.45A
- 充電器コード長さ : 約 1.3m

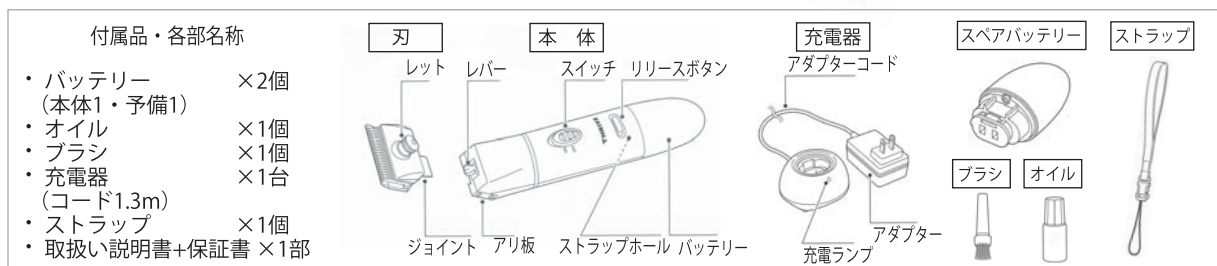

## E-20-505 小動物電気バリカン

替刃：ご希望の刃をお選びください。

スリムで軽量  
本体の密閉度UPにより、高い静音性を実現


交流タイプ

**MODEL 505 THRIVE**

本体価格 17,700円（税別）替刃は別売

[本体仕様] **水洗いできません**

- 寸法 :  $\phi 36 \times L165 \times H41$  mm
- コード : 約 2.5m
- 電源 : AC100V・50/60Hz・10W
- ストローク : 約 2,200 回転 / 分
- 重量 : 約 350g (刃付)

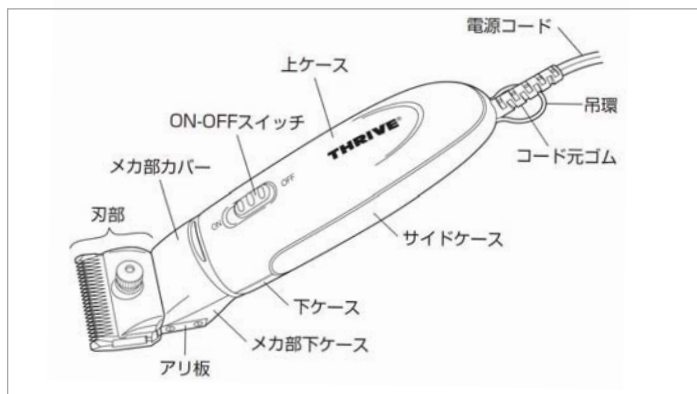

## E-20-5500 小動物電気バリカン

替刃：ご希望の刃をお選びください。

長年の実績を誇る最高級グレード  
「DLC&チタン」コーティング刃を採用


交流タイプ

**MODEL 5500 THRIVE**

本体価格 20,000円（税別）替刃は別売

[本体仕様] **水洗いできません**

- 寸法 :  $\phi 49 \times L192$  mm
- コード : 約 2.4m
- 電源 : AC100V・50/60Hz・20W
- ストローク : 約 2,100 回転 / 分
- 重量 : 約 600g (刃付)

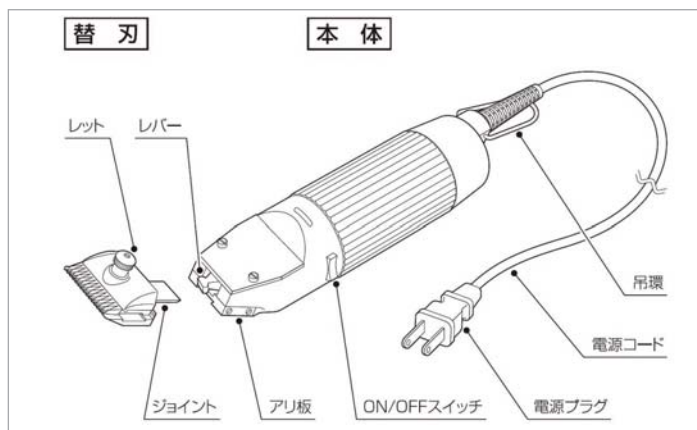


# 替刃各種 (MODEL 525 / 515R / 505 / 5500 対応)




サイズ	刃厚	刃幅	特長		
Special	0.5mm	45mm	コーティング (価格 5,800 円)		
0.5mm	0.5mm				
1mm	1mm				
2mm	2mm				
3mm	3mm				
5mm	5mm				
6mm	6mm				
7mm	7mm				
9mm	9mm				
11mm	11mm				
13mm	13mm				
16mm	16mm				
7/8	1mm			19mm	—

「DLC&チタン」コーティングの刃をラインナップ。

上刃・下刃にコーティングを施す事によって「よりよく切れる」、「より長い耐久性を持つ」刃に仕上がりました。

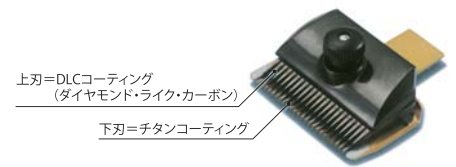

## ■ アタッチメントコーム

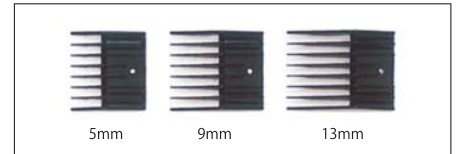

## 対象動物と機種

対象動物	適合推奨機種			
マウス・ラット	2100			
モルモット	2100	515R	505	5500
ウサギ・ネコ	525	515R	505	5500
イヌ・サル	525	515R	505	5500

\* 背中など毛の長くて硬い部分は、粗刈したうえで適合推奨機種をご使用ください。  
粗刈には、ウサギ・ネコなどは1mm以上、それ以上のサイズの動物には2mm以上の刃をご使用ください。  
\* 使用する部位・週齢により適合の刃は変わります。左表は参考例です。

## ご使用に際して

### ⚠ 安全に関するご注意

・ご使用前には、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

### 刃について

- ・お買い上げの際は、ご希望の刃をご指定ください。また、使用後は必ず刃の手入れをしてください。
- ・刃の組立て調整は、移動刃（上部）が指先で押して動く程度を目安にしてください。
- ・長い毛を刈る時は、直接短い刃で刈らず前もってハサミで短く切るか、長めの刃で粗く刈ってから仕上げ刈りをしてください。

### 刃の掃除・お手入れ

⚠ けがをしないよう注意して行ってください。



#### 下刃の掃除 (表裏面とも)

刃のクシ目や表面に付いている毛を、刃の根元から刃先に向かってブラシで払って取り除いてください。



#### 上刃の掃除 (表裏面とも)

刃のクシ目の根元の段差にたまる毛を横方向にブラシで払って取り除いてください。



#### 座金の掃除 (表裏面とも)

座金の凸凹部分も毛がたまりやすいので、ブラシで取り除いてください。



#### 皮脂よごれの掃除 (上下刃とも)

上刃・下刃とも刃の段差にオイルを少量垂らして、ティッシュペーパーで左右にふいて刃に付着した動物の油脂を取り除いてください。



株式会社 夏目製作所  
http://www.nazme.co.jp

本社 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6  
TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002

夏目 バリカン

検索



大阪支社 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18  
彩都バイオヒルズセンター3F  
TEL: 072-646-9311 FAX: 072-646-9300

V1-1608