

# 小動物電気バリカン各種

スライヴ



E-20-508

替刃：ご希望の刃をお選びください。

静音性に優れ、小型モーター搭載でより握りやすく持ちやすいグリップ設計  
軽量化により、手首と指先への負担を軽減  
操作しやすい「スライド式」の ON/OFF スイッチ  
よく切れ、耐久性に優れる DLC&チタンコーティング刃を採用

交流タイプ

MODEL 508 **THRIVE**

本体価格 18,000円（税別）替刃は別売




[本体仕様]

水洗いできません

- 寸法 :  $\phi 36 \times L170 \times H40$ mm (刃付)
- コード : 約2.5m
- 電源 : AC100V/10W・50/60Hz
- ストローク : 約2,000回転/分
- 重量 : 約265g (刃付)
- カラー : シャンパンゴールド (SG)



替刃

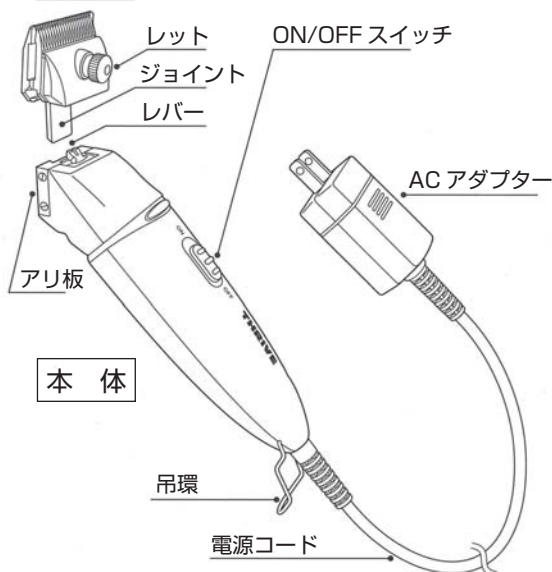

本体

付属品・各部名称

- ・ オイル ×1
- ・ ブラシ ×1
- ・ 専用ケース ×1

オイル

ブラシ



ご使用前の注油

替刃の矢印部↓、4ヶ所にオイルを注油してください。

①②座金と上刃の間に注油

③④レール（白い樹脂部）に注油

※注油は付属のオイル以外は使用しないでください。

