



KN-30651 ブタ・ミニブタ喉頭鏡 I ブレード

ブタ・ミニブタ専用の特殊な形状の LED 電球付喉頭鏡です。

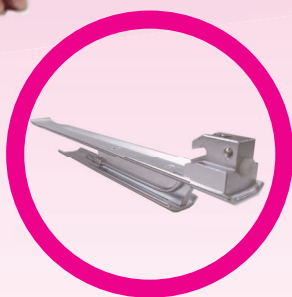

全 長 : 260 mm
はね全長 : 145 mm
ブレード先端幅 : 20mm
LED 光源

- KN-30651-L 喉頭鏡Iブレード(LED対応)・KN-30652 喉頭鏡ハンドル (LED対応)
- KN-30651-D 喉頭鏡Iブレード(電球対応)・KN-306-D4 喉頭鏡ハンドル (電球対応)

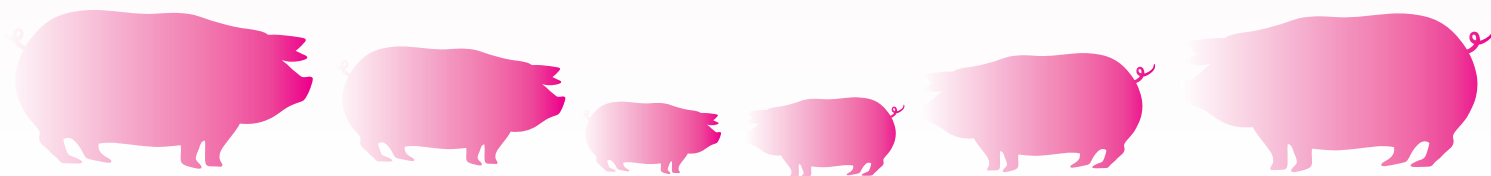

株式会社

夏目製作所

<https://www.nazme.co.jp>



KN-30651 ブタ・ミニブタ喉頭鏡 I ブレード

ブタ・ミニブタ専用の特殊な形状のLED電球付喉頭鏡です。

- ・ブレードの形状を「I」型にすることで、両側からのぞけ、口腔内の視野を確保しました。
- ・スプーン形状の先端にすることで、舌が落ちにくい構造になりました。
- ・より光が届くように光源の位置を変え、より明るく、より見やすく精度を上げました。


【仕 様】

全 長 : 260 mm
はね全長 : 145 mm
ブレード先端幅 : 20mm
材 質 : 真鍮メッキ仕上げ
LED 光源



● KN-306-D 豚用喉頭鏡

- KN-306-D1 マッキントッシュ改良型ブレード
寸 法 : L=280mm (電球付)
- KN-306-D2 フォーレガー型ブレード
寸 法 : L=300mm (電球付)
- KN-306-D3 フォーレガー型ブレード
寸 法 : L=200mm (電球付)
- KN-306-D4 喉頭鏡ハンドル (電池別売)
- KN-306-D5 電球

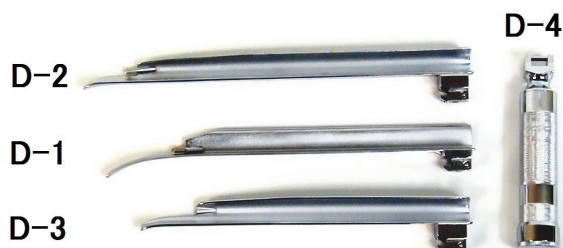

KN-560 遠赤外線保温装置

動物の手術時・術後の体温維持等の対策用です。飼育室内も適度な室温に保てます。キャスター付スタンドや壁かけ式など、設置方法に関してはご相談ください。

【仕 様】

● KN-560-10RKS

外 寸 : W900×L170×H270mm
(赤外線保温本体部のみ)
消費電力 : 1.0kWh
暖房能力 : 870kcal/h
重 量 : 5.2kg

● KN-560-15RKS

外 寸 : W1,200×L170×H270mm
(赤外線保温本体部のみ)
消費電力 : 1.5kWh
暖房能力 : 1,290kcal/h
重 量 : 6.2kg



KN-660 ブタケージ

仕切りを取り外し、飼育スペースを拡張することができます。
給餌器は洗浄しやすいよう、作業側側に反転する仕組みになっています。
ケージの下には採尿トレーが設置されています。スロープ設置タイプなどもございます。



外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。



本 社
〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL: 03-3813-3251
FAX: 03-3815-2002

大阪SSC
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1
TEL: 06-6398-7177
FAX: 06-6398-7178

夏目 ブタ

検索



V6-2503

