

小動物電気バリカン各種

スライヴ



E-20-556

替刃：ご希望の刃をお選びください。

コードレスバリカンでスペアバッテリー付
電源ボタンはスライド式、手にフィットするスリムな軽量モデル

充電・カセット電池式タイプ (スタンド式)

MODEL 556-P

替刃は別売

[本体仕様] 水洗いできません

- 重量/約300g (刃部含む場合)
- ストローク/約2,400回/分
- 外形寸法/(約)長さ205mm×直径45mm×高さ42mm (刃付)
- 連続使用時間/約90分 (フル充電時)
- 刃(替刃式)/5000系シリーズ

[カセット式充電電池]

- 充電時間/約120分
- 使用電池/リチウムイオン電池
- バッテリー定格電圧/DC3.6V
- バッテリー容量/2900mAh
- 充電器定格電圧/入力: AC100V・50/60Hz・0.15A
出力: DC4.2V・2A
- アダプター・充電器/約1.8m(コード長さ)



E-20-509

替刃：ご希望の刃をお選びください。

超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。
超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。

交流タイプ

MODEL 509 THRIVE

替刃は別売

[本体仕様]

水洗いできません

- 寸法 : $\phi 45 \times L118 \times H37$ mm (刃付)
- コード : 約2.5m
- 電源 : AC100V/10W・50/60Hz
- ストローク : 約1,850回転/分
- 重量 : 約235g (刃付)
- カラー : ブラック/シルバー (BK/SL)
ブラック/ピンク (BK/PK)
ピンク/シルバー (PK/SL)



E-20-2200

替刃：専用替刃 (0.5 mm) のみです。

軽量、細身のコードレスタイプで約45分間連続使用可能
3mmと6mmのアタッチメント付デリケートな部分の仕上げに最適

(E-20-2100 後継機)

充電タイプ〈スタンド式〉

MODEL 2200 THRIVE

専用替刃付(0.5mm)

[本体仕様]

水洗いできません

- 寸法 : $\phi 33 \times L152 \times H33$ mm (刃付)
- 電源 : AC100V・50/60Hz・10W
- ストローク : 約4,500回転/分
- 重量 : 約112g (刃付)
- カラー : ブラック

[充電機]

- 連続使用時間 : 約45分 (1時間フル充電時)
- 充電時間 : 約1時間
- 使用電池 : リチウムイオン電池
- 充電器コード : 約1.6m



- Model2200用専用刃は、Model2100で使用可○
- Model2200用充電器は、Model2100で使用不可×

E-20-535Z

替刃：ご希望の刃をお選びください。

コンパクトなボディと2段階スピード切替機能で部位によって速さ調節が可能
操作しやすい「スライド式」のON/OFFスイッチ

(E-20-535 後継機)

交流タイプ

MODEL 535Z THRIVE

替刃は別売

[本体仕様]

水洗いできません

- 寸法 : $\phi 45 \times L178 \times H52$ mm (刃付)
- コード : 約2.5m
- 電源 : AC100V・50/60Hz・15W
- ストローク : High 約1,800回転/分
(2速切替) : Low 約1,550回転/分
- 重量 : 250g (刃付)
- カラー : ブラック (B)



長年の実績を誇る最高級グレード
よく切れ、耐久性に優れる DLC&チタンコーティング刃を採用

交流タイプ

MODEL 5500 THRIVE

替刃は別売

[本体仕様] 水洗いできません

- 寸法 : φ49×L192 mm (刃付)
- コード : 約2.4m
- 電源 : AC100V・50/60Hz・20W
- ストローク : 約2,100回転/分
- 重量 : 約600g (刃付)



替刃各種 (MODEL 508 / 535Z / 556 / 5500 対応)



サイズ	刃厚	刃幅	特長
Special	0.5mm	45mm	コーティング
0.5mm	0.5mm		
1mm	1mm		
2mm	2mm		
3mm	3mm		
5mm	5mm		
6mm	6mm		メッキ仕様
7mm	7mm		
9mm	9mm		
11mm	11mm		
13mm	13mm		
16mm	16mm		

「DLC&チタン」コーティングの刃をラインナップ。


上刃・下刃にコーティングを施す事によって「よりよく切れる」、
「より永い耐久性を持つ」刃に仕上がりました。

上刃=DLCコーティング
(ダイヤモンド・ライク・カーボン)

下刃=チタンコーティング



■ アタッチメントコーム

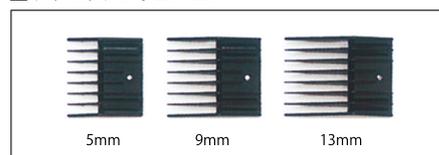

対象動物と機種

対象動物	適合推奨機種
マウス・ラット	2200
モルモット	2200 509 556 5500
ウサギ・ネコ	535Z 509 556 5500
イヌ・サル	535Z 509 556 5500

* 背中など毛が長くて硬い部分は、粗削りしたうえで適合推奨機種をご使用ください。

粗削りには、ウサギ・ネコなどは1mm以上、イヌ・サルなどには2mm以上の刃をご使用ください。

* 使用する部位・週齢により適合の刃は変わります。
左表は参考例です。

ご使用に際して

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用前には、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

刃について

- ・お買い上げの際は、ご希望の刃をご指定ください。
- ・使用後は必ず刃の手入れをしてください。
- ・刃の組立て調整は、移動刃（上部）が指先で押してスムーズに動く程度を目安にネジを締めてください。
- ・長い毛を刈る際は、直接薄い刃で刈らず前もってハサミで短く切るか、厚めの刃で粗刈を行ってから仕上げ刈りをしてください。

刃の掃除・お手入れ

⚠ けがをしないよう注意して行ってください。



下刃の掃除（表裏面とも）

刃のクシ目や表面に付いている毛を、刃の根元から刃先に向かってブラシで払って取り除いてください。



上刃の掃除（表裏面とも）

刃のクシ目の根元の段差にたまる毛を横方向にブラシで払って取り除いてください。



座金の掃除（表裏面とも）

座金の凸凹部分も毛がたまりやすいので、ブラシで取り除いてください。



皮脂よごれの掃除（上下刃とも）

上刃・下刃とも刃の段差にオイルを少量垂らして、ティッシュペーパーで左右にふいて刃に付着した動物の皮脂を取り除いてください。




刃のはずし方・つけ方

⚠ けがをしないよう注意して行ってください。



刃のはずし方

親指で②を押しながら、矢印の方向へ刃を引き抜いてください。

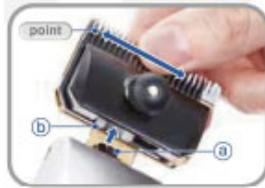

刃のつけ方①

本体フック②を刃フック受け①にはめてください。

point

上刃を親指で左右に動かしてフック位置を合わせる。



刃のつけ方②

本体をしっかり持って、矢印の方向へ刃を差し込んでください。

オイル滴下ポイント

⚠ けがをしないよう注意して行ってください。



オイル滴下

ポイント4箇所に滴下し、オイルを刃全体になじませてください。

