

KN-CCS-1200

ケージ交換ステーション

[**C**age **C**hanging **S**tation]



KN-CCS-1200

洗練されたデザインのケージ交換ステーション [CCS]

使いやすい8inch液晶タッチパネル

透明な樹脂製フロントパネルは、良好な気流を保ちつつ操作性を向上させます。
またロック付き蝶番により、安全にフロントパネルを開口状態で保つことが可能です。

昇降スイッチは、CCS本体に取り付けられております。清掃しやすいようにフラットなデザインを採用しています。






CCSの設置場所を清掃するため、室内を移動しやすいようにキャスターを装備しています。



特徴

- ・使いやすい8inch液晶タッチパネルを使用しています。※自動で画面を暗くするSleep Mode搭載。
- ・作業者の身長に合わせて、調整可能な「電動昇降機能」を有しています。
 - 最低高さを750mmに設定することで、小柄な方でも使いやすい形状となっています。
- ・作業面はSUS304製で、傷付きにくく、耐薬品性を有しています。
- ・HEPAフィルターと効率的なファンおよび気流制御により、作業面において「ISO3」の清浄度をクリアしています。
- ・CCSの設置場所を清掃するため、室内を移動しやすいようにキャスターを装備しています。
- ・透明な樹脂製フロントパネルは、良好な気流を保ちつつ操作性を向上させます。
 - またロック付き蝶番により、安全にフロントパネルを開口状態で保つことが可能です。
- ・クリーンで洗練されたデザインです。
- ・壁面側への設置を想定し、背面をフラットな形状とし、かつ前面に引き出しやすいように前面にハンドルを2か所設置しています。
- ・側板にチューブや配線を通すことができるポートを設けています。

液晶タッチパネル・操作画面

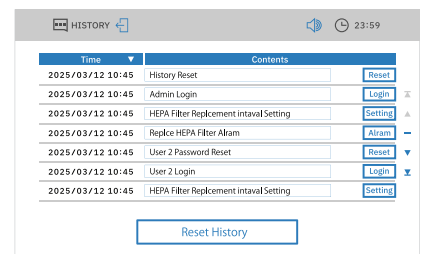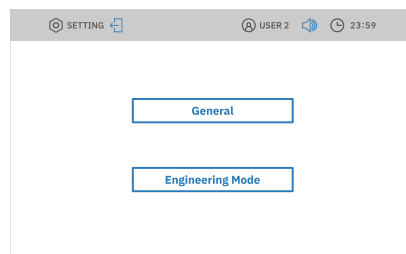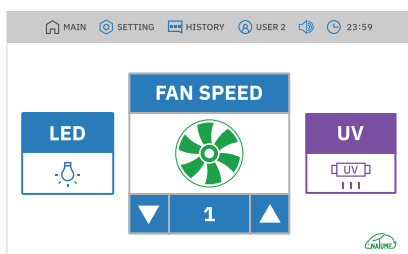



透明な樹脂製フロントパネルは、良好な気流を保ちつつ操作性を向上させます。またロック付き蝶番により、安全にフロントパネルを開口状態で保つことが可能です。

作業面はSUS304製で、傷付きにくく、耐薬品性を有しています。

作業者の身長に合わせて、調整可能な「電動昇降機能」を有しています。最低高さを750mmに設定することで、小柄な方でも使いやすい形状となっています。

寸法



技術仕様

ケージ交換ステーション

型式	KN-CCS-1200
外寸 (W x D x H, mm)	1,200 x 800 x 1,798 mm ※昇降を一番下に降ろした状態
作業面寸法 (W x D x H, mm)	1,180 x 650 x 750~1,050 mm
材質	本体: スチール (粉体塗装) / 作業面: SUS304
フィルタ	HEPAフィルタ (0.3 μ m, 99.97%), プレフィルタx2
電動昇降機能	0 ~ 300 mm (最低位置750~最高位置1,050mm)
騒音値	65 dB(A)未満
LED照明 / UV灯	1,000lx以上 / UV-C 30W
電源	AC 100V, 50~60Hz, 800W
重量	300 kg未満
クリーン度	ISO3(作業面上にて)
タッチパネル	8inch 液晶タッチパネル
Sleep Mode	OFF, 60min, 90min 選択可能

※製品の仕様は、改良等のため予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

