

Since 1946 | Fine tools from Japan.

Human-animal friendly manufacturing



KN-CCS-1200

ケージ交換ステーション [Cage Changing Station]



KN-CCS-1200

洗練されたデザインのケージ交換ステーション [CCS]

使いやすい8inch液晶タッチパネル

透明な樹脂製フロントパネルは、良好な気流を保ちつつ操作性を向上させます。またトルクヒンジにより、安全にフロントパネルを開口状態で保つことが可能です。

昇降スイッチは、CCS本体に取り付けられております。清掃しやすいようにフラットなデザインを採用しています。





CCSの設置場所を清掃するため、室内を移動しやすいようにキャスターを装備しています。



特徴

- 使いやすい8inch液晶タッチパネルを使用しています。※自動で画面を暗くする Sleep Mode 搭載。
- 作業者の身長に合わせて、調整可能な「電動昇降機能」を有しています。最低高さを750mmに設定することで、小柄な方でも使いやすい形状となっています。
- 作業面はSUS304製で、傷付きにくく、耐薬品性を有しています。
- HEPAフィルターと効率的なファンおよび気流制御により、作業面において「ISO3」の清浄度をクリアしています。
- CCSの設置場所を清掃するため、室内を移動しやすいようにキャスターを装備しています。
- 透明な樹脂製フロントパネルは、良好な気流を保ちつつ操作性を向上させます。またトルクヒンジにより、安全にフロントパネルを開口状態で保つことが可能です。
- クリーンで洗練されたデザインです。
- 壁面側への設置を想定し、背面をフラットな形状とし、かつ前面に引き出しやすいように前面にハンドルを2か所設置しています。
- サイドパネルにチューブや配線を通すことができるポートを設けています。

液晶タッチパネル・操作画面

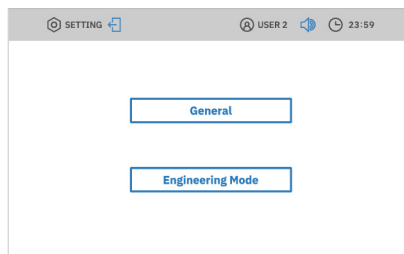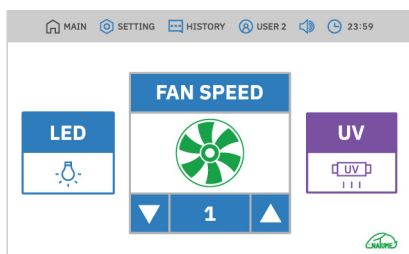




透明な樹脂製フロントパネルは、良好な気流を保ちつつ操作性を向上させます。またトルクヒンジにより、安全にフロントパネルを開口状態で保つことが可能です。

作業面はSUS304製で、傷付きにくく、耐薬品性を有しています。

作業者の身長に合わせて、調整可能な「電動昇降機能」を有しています。最低高さを750mmに設定することで、小柄な方でも使いやすい形状となっています。

寸法

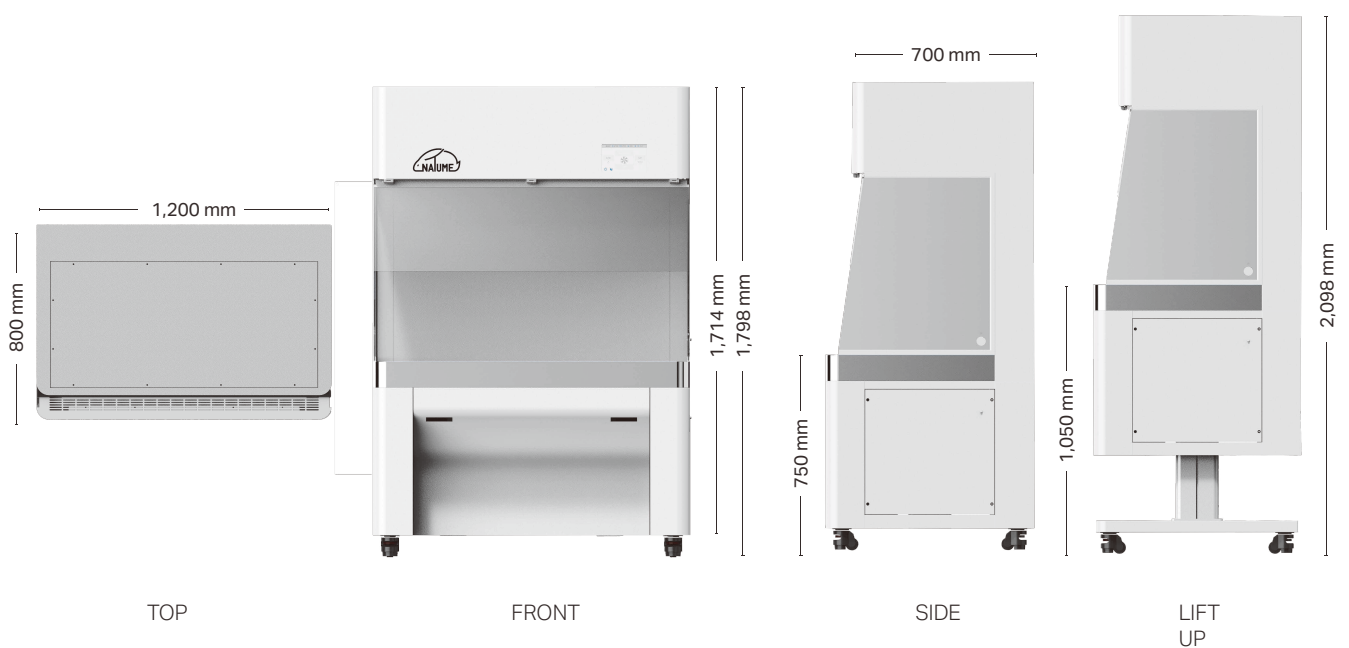

技術仕様

ケージ交換ステーション

型番	KN-CCS-1200
外寸 (WxDxH, mm)	1,200 x 800 x 1,798 ~ 2,098mm (電動リフトタイプ)
作業面寸法 (WxDxH, mm)	1,180 x 650 x 750 ~ 1,050mm (電動リフトタイプ)
材質	本体: スチール粉体塗装 / 作業面: SUS304 / パネル: 透明ポリカーボネート
フィルタ	HEPAフィルタ (0.3 μm, 99.97%), プレフィルタx2
電動昇降機能	0 ~ 300 mm (最低位置 750 ~ 最高位置 1,050mm)
騒音値	65db (A) 未満
LEDランプ / UVランプ	1,000lx以上 / UV-C 30W
電源	AC 100V, 50/60Hz, 800W
重量	約300kg
クリーン度	ISO3 (作業面上にて)
操作パネル	8inch 液晶タッチパネル
Sleep Mode (自動スリープ機能)	OFF, 10min, 30min, 60min
AutoUV (自動 UVランプ点灯機能)	OFF, 10 ~ 60min (10min刻み)
Alarm (アラーム機能)	HEPAフィルタ交換アラーム, UVランプ交換アラーム

※製品の仕様は、改良等のため予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



<https://www.nazme.co.jp>

本社 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1
TEL: 06-6398-7177 FAX: 06-6398-7178