





従来品

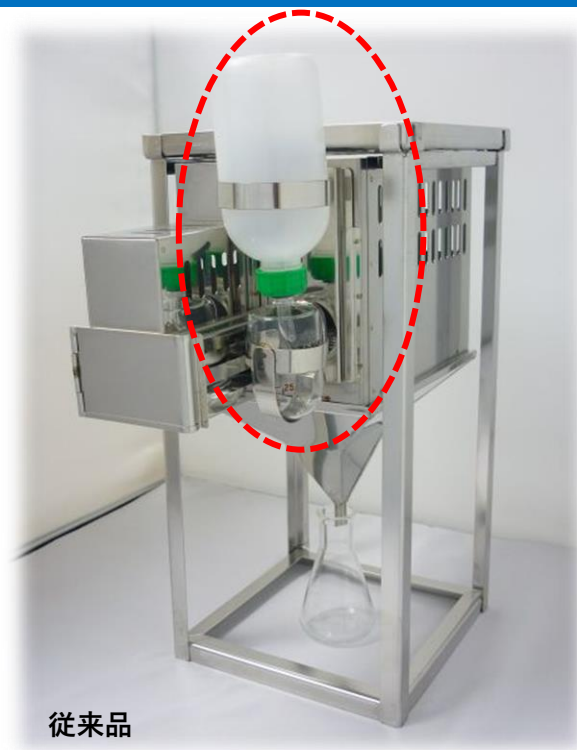

後継品

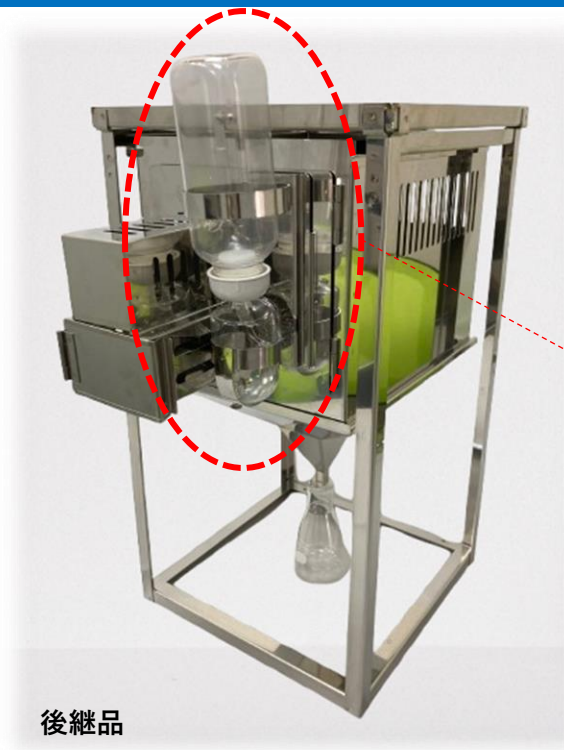

	従来品		後継品	
給水瓶	KN-670-2-2 No.5B 250ml、PP製	【販売終了】	KN-670-2-7 No.8A 200ml、PC製	
給水栓	KN-670-3-1 No.5給水瓶用(パッキン付)	【在庫限り】	CL-2732 レジンキャップ	
給水器 (飲み口)	KN-646-W-2 給水器、ガラス製	【従来品から変更なし】	* 給水栓からの着脱は、手袋・保護メガネ等の保護具を用いて、怪我に注意して作業をおこなってください。	
ホルダー	KN-646-K 給水瓶ホルダー (No.5B専用)	【販売終了】	KN-646-H 給水瓶ホルダー (No.8A専用)	* 従来品のホルダーも使用可能です。ただし、ホルダー部の簡単な調整が必要です。(次ページ参照)

給水瓶をホルダーに取り付けて、以下の2点について従来品と比較し、必要に応じて調整を行ってください。

従来品との比較ポイント



ホルダー調整後



調整方法



ホルダー下部を手前に持ち上げるように位置を調整してください。



給水瓶/レジンキャップ/ガラス給水器を組み立て、ホルダーに取り付けてください。

*** 給水栓からの着脱は、手袋・保護メガネ等の保護具を用いて、怪我に注意して作業をおこなってください。**

ホルダー下部の位置を調整して、給水器との隙間が小さくなるように設定してください。

従来品と比較して、
1. 隙間が大きくなること
2. 給水器が干渉していないこと
をご確認の上、ご使用ください。