

New Product

80th Anniversary



つながりを力に、未来へ

5.27
on sale

軽い・ぴったり・逃がさない。
これが新しいネズミ返し。



情報モリたくさん！
こちらのQRも
チェック！



NEW 80周年記念製品 KN-723

伸縮型ネズミ返し

限定20枚の特別価格◎ ¥30,000(税別)



- ネズミ返しの着脱が多い
- 動物を取り扱う場所が変わることがある
- 災害対策のストックとして汎用性の高いものが欲しい



<https://www.nazme.co.jp>



つながりを力に、未来へ

80th Anniversary

伸縮型ネズミ返し KN-723

Adjustable Rodent Guard

受注生産
じゃないので
短納期

未使用時は
縮めて
楽収納

着脱簡単な
マグネット式
汎用性


最小
サイズ

W800×H450



最大
サイズ

W1500×H450

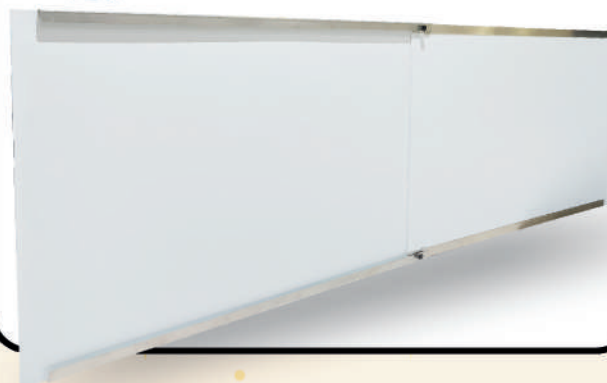

実験室が移設してドア枠が変わっても対応可能!!

※ドア枠がW800～W1500の場合

アルミ複合版使用


発砲プラスチックを薄いアルミで挟み込んだ3層構造の板材。軽量で扱いやすく、耐久性も兼ね備えた素材です。

従来製品との重量比較

※右記はH450・マグネット式ネズミ返しの製品重量です。

仕 様	W800	W1500
伸縮型	2.2 kg	2.2 kg
ステンレス製	4.0 kg	6.9 kg
アルミ製	1.4 kg	2.3 kg
塩ビ製	3.1 kg	5.8 kg

マグネット式により取り付けが簡単

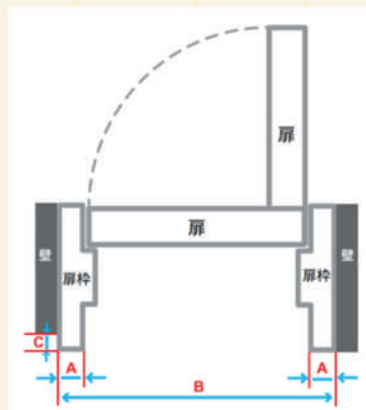

**B寸法が
800mm～
1500mmで
取り付け可能**

※ドア枠が非磁性(磁石がつかない)の場合は、オプションのフラットバー(強力テープ貼付タイプ)で使用可能です。



株式会社 夏目製作所
https://www.nazme.co.jp

◎本 社
〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251 FAX : 03-3815-2002

◎大阪SSC
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177 FAX : 06-6398-7178



V1-2604J

New Product

80th Anniversary

より安心して
使い続けていただくために



つながりを力に、未来へ

5.27
on sale



情報もりたくさん！
こちらのQRも
チェック！



80
セット
限定販売

NEW

80th Anniversary Campaign

麻酔装置

KN-1071-G-I
KN-1071-G-S

80周年キャンペーン



<https://www.nazme.co.jp>

type-2



つながりを力に、未来へ

80th Anniversary

麻酔装置 80周年キャンペーン NARCOBIT-E(Ⅱ) Campaign

KN-1071-G-I
KN-1071-G-S

オーバーホール 点検 1 回付



安心の点検サービス

麻酔装置・気化器部の分解清掃
リーク試験・濃度調整点検
¥78,000(税別)相当

記念製品の
ゴールデン・
カラフロメーターを
付属！



製品情報QR



80セット限定の特別キャンペーン 安心の点検サービス付。

※ご依頼期限：80セット完売、
または2027年3月31日までのいずれか早い方。

コード	型番・品名	定価
KN-1071-G-I	80周年キャンペーンセット(イソフルラン用)	¥360,000(税別)
KN-1071-G-S	80周年キャンペーンセット(セボフルラン用)	¥400,000(税別)


マウス・ラット等小動物実験用簡易吸入麻酔装置

NARCOBIT-E(Ⅱ型)のご紹介

使いやすさとコスト最適化を追究した簡易吸入麻酔装置です。
卓上で扱いやすいコンパクト設計に加え、豊富な周辺機器を
取り揃えており、使用する動物種や実験内容に応じて、必要な
構成を柔軟に組み合わせてご使用いただけます。

こちらから
check

NARCOBIT-E(Ⅱ型)
製品ページ

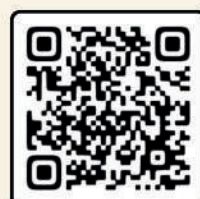

株式会社 夏目製作所
https://www.nazme.co.jp

◎本社
〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002

◎大阪SSC
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL: 06-6398-7177 FAX: 06-6398-7178



V1-2604J

New Product

80th Anniversary



つながりを力に、未来へ

5.27
on sale



80
台
限定販売

NEW

80th Anniversary model

ゴールデン
カラフロメーター

KN-1013-1-G

金色、それは黄金の輝き...

情報モリたくさん！
こちらのQRも
チェック！



<https://www.nazme.co.jp>



つながりを力に、未来へ

80th Anniversary

ゴールデン KN-1013-1-G カラフロメーター

Golden Colorful-ometer

1L/minシリーズに6色目が記念販売します！



Image Photo

LIMITED TIME
OFFER

**80台限定で
弊社80周年記念カラーの
金色にて販売いたします！**

※1L/minのみの販売となります。

こちらも
**CHECK
IT OUT**

■カラフロメーター販売情報

ご使用の回路ごとに、
カラフロメーター本体の色分けが可能です。

通常販売にて5色（黄・青・赤・緑・橙）
販売展開しております。 ※1L/minにて販売中

5L/minのみ黒も販売中。

麻酔装置80周年キャンペーン

**オーバーホール
点検 1回付**



キャンペーンQR

安心の点検サービス

麻酔装置・気化器部の分解清掃
リーク試験・濃度調整点検
¥78,000(税別)相当



株式会社 夏目製作所
<https://www.nazme.co.jp>

◎本 社
〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251 FAX : 03-3815-2002

◎大阪SSC
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177 FAX : 06-6398-7178



V2-2605J

New Product

80th Anniversary



つながりを力に、未来へ

周年内発売を目指し

開発中

Currently under development

開発中のため
仕様が変更となることが
ございます。



情報モリたくさん！
こちらのQRも
チェック！



NEW 80周年記念製品 KN-476

ヒーターマット

使い慣れた安心に、しっかり進化を！

Purpose
用途

- ・ マウス・ラットなど小動物の体温管理に。
- ・ 麻酔下、術前・術後の周術期保温に。
- ・ ケージごとの保温から、動物を載せて処置中の保温も。
- ・ 採血前の血管拡張や、新生仔の保温にも。



<https://www.nazme.co.jp>



80th Anniversary

ヒーターマット KN-476

Heater Mat 開発中のため仕様が変更となることがございます。

つながりを力に、未来へ

「なくなったら困る！」のお声に背中を押され、鋭意開発中です！



マウスケージ(KN-600U)をそのまま置いて保温できる20×30cm。卓上でも場所を取らず、使いやすいサイズです。



表面シートは汚れが付きにくく、水洗いにも対応。シンクでさっと洗えるため、日常のお手入れがしやすく、清潔な状態でご使用いただけます。

進化
ポイント！

温度コントローラありのラインナップを追加し、環境温度や用途により、マット面の温度調整可。

ゴム足と重量感のある仕様で滑りづらい。

変わらぬ
使いやすさ！

マットは水洗・アルコール清拭可。汚れにくく、洗いやすい。

使いやすいサイズで解剖台使いも、ケージ保温も。



発売をいち早く知りたい方へ！
ご案内メールに登録いただけます。



株式会社 夏目製作所
https://www.nazme.co.jp

◎本社
〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251 FAX : 03-3815-2002

◎大阪SSC
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177 FAX : 06-6398-7178



V1-2604J

New Product

80th Anniversary



つながりを力に、未来へ

5.27
on sale



1000
限定販売

NEW

80th Anniversary model

Oppen Orange

KN-297-O-80PJ

【実験動物専用IDマーカー】

個体識別マーカーに新色が登場！

*ご好評の場合、定番ラインナップへの追加を予定しております。

情報モリたくさん！
こちらのQRも
チェック！



<https://www.nazme.co.jp>



つながりを力に、未来へ

80th Anniversary

KN-297-O-80PJ

Oppen Orange

Laboratory animal's ID marker

Usage
Examples

Day1
ICR



Usage
Examples

Day2
ICR



Usage
Examples

Day3
ICR



Usage
Examples

Day7
ICR



※写真は参考であり、環境の照明種により色の見え方が異なることがあります。

[Oppen の特徴]

- ◎ 新色のオレンジがラインナップに加わり、合計6色となりました。
- ◎ アルビノマウスだけでなく、C57BL/6などの有色マウスにおいても、尾部と皮膚へのマーキングが可能です。
- ◎ 動物に安全なインクを使用しています。 ※急性経口毒性試験実施済み

コード	商品名	定 価	白色マウス・尾	黒色マウス・尾
KN-297-O-80PJ-6	Oppen 80th Anniversary model Orange [6pcs/pack]	¥ 3,900	○	○
KN-297-O-80PJ-1	Oppen 80th Anniversary model Orange [1pc]	¥ 800	○	○



株式会社 夏目製作所
https://www.nazme.co.jp

◎本 社
〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251 FAX : 03-3815-2002

◎大阪SSC
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177 FAX : 06-6398-7178



V1-2604J



NAZME ID

マウス・ラットの尾や皮膚に使用できる

[実験動物専用]の個体識別マーカー



Laboratory animal's ID marker

Oppen

KN-297



特徴

アルビノマウスだけでなく、
C57BL/6のような有色マウスの尾でも
マーキングを識別できる5色をラインナップ。

動物への使用に安全なインク。

NEW

細いペン先のラインナップが追加。
小さな「数字」も、にじまず書くことができ、
識別の幅が更に広がりました。

Check !

短期間の場合、動物の耳を
カットするイヤーパーチや耳
標ではなく、「Oppen」で尾に
印をつける方法を選択する
ことは、動物への負担も少なく、
実験者にとっても手軽な
方法です。



Oppen 5色

Twin marker



THICK (太)

THIN (細)

マウス・ラット・ウサギなどに、「線」「印」を書くための最適ツール！

コード	商品名	定 価	白色マウス・尾	黒色マウス・尾
KN-297-B-6	Oppen Black [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-G-6	Oppen Green [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-P-6	Oppen Pink [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-LB-6	Oppen Light Blue [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-V-6	Oppen Violet [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-B-1	Oppen Black [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-G-1	Oppen Green [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-P-1	Oppen Pink [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-LB-1	Oppen Light Blue [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-V-1	Oppen Violet [1pc]	¥1,500	○	○

Single marker



FINE
(極細)

マウス・ラット尾に
「数字」「文字」を書くための

NEW Oppen For Numbers 3色

コード	商品名	定 価	白色マウス・尾	黒色マウス・尾
KN-297-N-B-6	Oppen for Numbers Black [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-N-P-6	Oppen for Numbers Pink [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-N-LB-6	Oppen for Numbers Light Blue [6pcs/pack]	¥5,000	○	○
KN-297-N-B-1	Oppen for Numbers Black [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-N-P-1	Oppen for Numbers Pink [1pc]	¥1,500	○	○
KN-297-N-LB-1	Oppen for Numbers Light Blue [1pc]	¥1,500	○	○

手術などでの耳・皮膚へのマーキングにもご使用いただけます。

ICR

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 7

Black

Green

Pink

Light
Blue

Violet

※系統・個体差によりインクの持続性は異なることがあります。※環境の照明種により色の見え方が異なることがあります。

Oppen for Numebers (極細タイプ) 3色◎Black・Pink・Light Blue

急性経口毒性試験
最終報告書 (要約)お客様の声・使用事例
Oppen
商品ページAnimal Marker
商品ページ被毛での識別をご希望の場合は
アニマルマーカがおススメです。株式会社 夏目製佐所
<https://www.nazme.co.jp>◎本 社
〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002◎大阪 SSC
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1
TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178

V6-2604J



NAZME ID



Labstamp®

Labstamp®はSOMARK社(米国)が開発したマウス専用自動入墨器です。



脱落しない。繰り返さない。 世界で唯一の自動入墨システム

▶ たった1回で“消えない”IDを自動印字

『START』から約30秒*1

マウスを保定器に入れ、本体にセット後、STARTボタンを押すだけで最大3桁、50,000パターン以上のIDがクリアに印字できます。

尾の真皮中間層にインクが塗布されるため、かすんだり消えたりせず、繰り返しのマーキング作業は不要です。

*1) 印字する桁数や数字・文字により所要時間が異なります。

▶ 持ち上げず、保定せず、識別できる

印字されたIDは、ケージの外からでも読み取れるほど鮮明。動物に触れることなく識別できるため、IDの確認作業を効率化するとともに、動物への負担軽減にもつながります。


▶ 黒色系マウスにも。使い分けできる2色のインク

インクはスタンダードなブラックと、黒色系マウスでも識別しやすいUVグリーン*の2色展開。手元で使いやすいUVライトも付属しています。



※外見・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

▶ 誰でも短時間で習得できる簡単操作

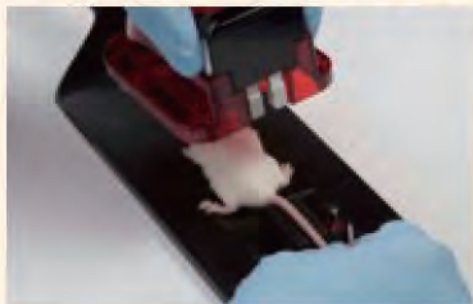

①マウスを保定器の中に入れ、グリッパーでやさしく尾を挟みます。



②テイルゲージで使用するニードルを選びます。



③ニードルを本体にセットします。



④尾にテイルオイルを塗ります。



⑤インク・スライドを差し込んだテイルカバートを装着します。



⑥保定器を本体にセットし、印字するアルファベットや数字を入力します。「START」を押すとライトが赤く点滅し、ライトが緑に変わったら印字終了です。

■仕様

本体外寸	W277×D318×H102mm
電源	100V 50/60Hz
インクカラー	ブラック、UVグリーン
IDパターン	最大3桁・56,354/パターン*2 *2) アルファベット大文字 (A~Z)、 数字 (0~9)、記号 (+, -) の組み合わせ
機能	ID連続入力機能 例「001→002→003…」 「A01→A02→A99→B01→B02…」

■対象動物

マウス (離乳頃以降のマウスを対象)

■詳しい情報、使い方はこちら

夏目製作所
商品ページ



SOMARK社
Product Page



SOMARK社
Training Video



写真は旧型モデル (本体: 青) です。
現行品は新型モデル (本体: 緑) となります。

01-99100 Labstamp スターターパック

【付属品】 *滅菌済

- 01-99002 保定器 小
- 01-99003 保定器 大
- 01-99015* ニードル 黄 (Long) 1個 ※使用目安: 50匹/個
- 01-99016* ニードル 緑 (Short) 1個 ※使用目安: 50匹/個
- 01-99030* インク・スライド ブラック 20枚入
- 01-99032* インク・スライド UVグリーン 20枚入
- 01-99009* テイルオイル 100ml
- 01-99025 UVライト
- 01-99018 テイルゲージ

※付属品をご購入の際は上記製品コードでお問合せ下さい。
※スターターパックには使用動画とユーザーマニュアル (英文) が含まれています。

※外見・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。




マウス尾静脈固定・可視化装置

ミエライト

NEW!
2026年5月より販売開始

ミエライトは、動物実験で不可欠な尾静脈注射をより確実かつ容易に行えることを実現した装置です。

無麻酔下のマウス尾部を安定して固定し、下方からの照明により静脈を可視化することで確実な穿刺をサポートします。

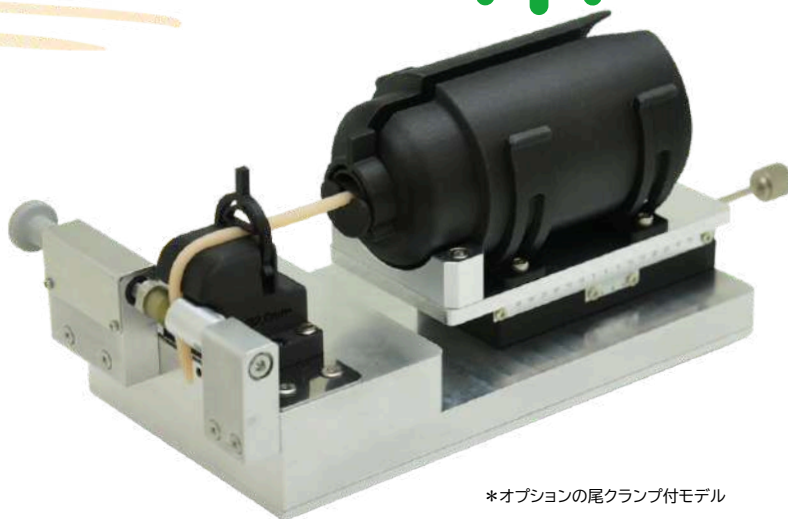

*オプションの尾クランプ付モデル



特長

✓ ライト機能

黒毛マウスや血管が細かい個体でも、下からライトを当てることで尾静脈をくっきり見やすくすることができます。



✓ ハンズフリー

マウスの尾を固定できるので、投与が苦手な方もシリンジ操作に集中することができます。



*オプションの尾クランプ付モデル

✓ 穿刺位置調整機能

ホルダ位置を前後することで穿刺位置の調整を容易にすることができます。




✓ マウスのストレス軽減


マウスの頭を押さえつけず尾だけで固定をするため、マウスへのストレス軽減につながることができます。




尾の見え方

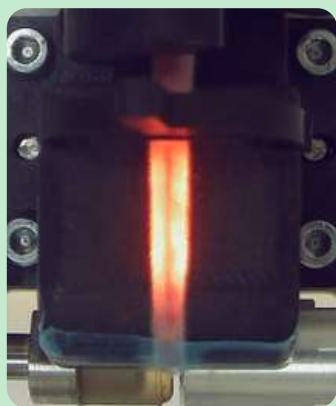


系統:C57BL/6
オス♂、7W

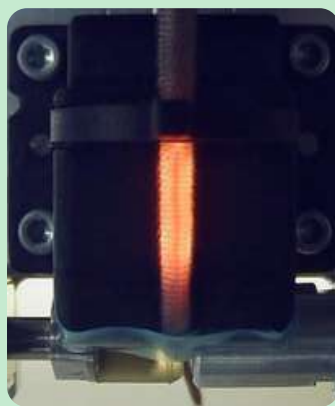


系統:ICR
オス♂、3W

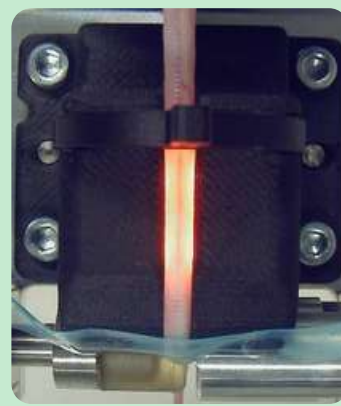


系統:BALB/c nu/nu
オス♂、10W

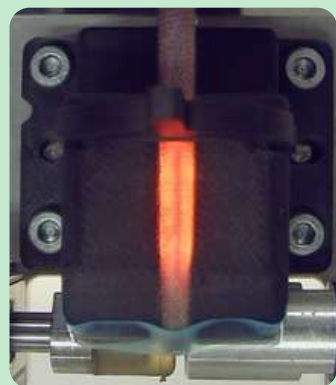


系統:C3H
メス♀、52W

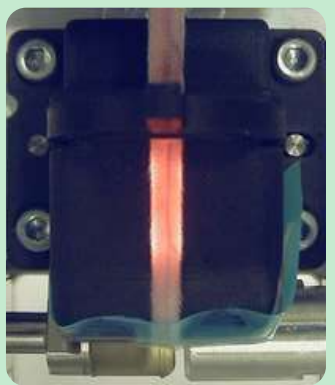

系統:BALB/c
メス♀、6W

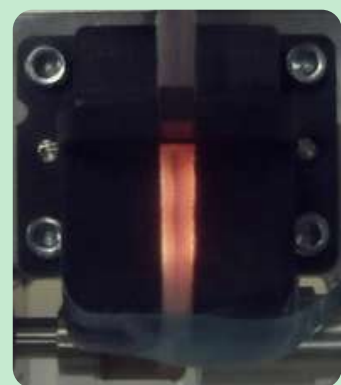

系統:NOG
オス♂、5W

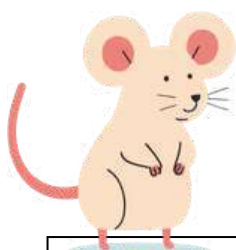

製品名・型番	ミエライト ICRセット	KN-1100-ML-3	寸法	W100 × D219 × H105mm (本体のみ) (W115 × D233 × H105mm (本体+尾クランプ付))
	ミエライト ICRセット (尾クランプ付)	KN-1100-ML-3C	対象動物	マウス各種
	ミエライト B6セット	KN-1100-ML-2	電源	ACアダプタ (AC100 ~ 240V) , 2A
	ミエライト B6セット (尾クランプ付)	KN-1100-ML-2C	希望小売価格	お問合せください。
	ミエライト ICR+B6セット	KN-1100-ML-23		
	ミエライト ICR+B6セット (尾クランプ付)	KN-1100-ML-23C		

※総販売元：住商ファーマインターナショナル（株）、製造元：（株）夏目製作所、ライセンス元：（株）Preferred Networks。

* 本カタログ記載のスペックは予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
* 本カタログ製品はすべて研究用途のみにご使用いただけます。

取扱代理店

●総販売元
住商ファーマインターナショナル 株式会社
研究推進部 バイオサイエンスグループ

本 社 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号
TEL: 03-5220-1520
Email: biosupport@summitpharma.co.jp

横浜サポート センター 〒230-0045 横浜市鶴見区末広町1-6
横浜バイオ産業センター



April 2026